



SV

MOBIAK®
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977



BRUKSANVISNING: ELEKTRISK FÄLLBAR PATIENTLYFT
"ACHILLEAS" (150 kg)

REF: 0803150

Läs bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk.
Viktiga säkerhetsanvisningar

PRODUKTBESKRIVNING – AVSEDD ANVÄNDNING

Denna enhet är avsedd för att lyfta och förflytta personer med rörelsehinder. Lyften är lämplig för användning både på sjukhus och i hemmet.

VAR FÖRSIKTIG: Lyften klarar patienter upp till 150 kg. Överskrid inte denna gräns.

Lyften har bromsar på bakhjulen.

MONTERING

1. Avlägsna tillbehören från motorn, men avlägsna inte skruven eftersom den sitter på rätt plats.
2. Avlägsna säkerhetsanordningen (metallskruven) så att huvudpelaren kan stabiliseras enligt följande bild



3. Justera till rätt position för dig och sätt tillbaka säkerhetsanordningen (metallskruven) för att stabilisera den
4. Avlägsna skruven enligt nästa bild



5. Placera batteriet enligt bilden nedan och skruva fast skruven igen.




6. Anslut styrenheten enligt nästa bild.



7. Dra den röda säkerhetsknappen utåt.
8. Sätt på lyftpåsen.
9. Lyften är nu klar att användas.
10. Se till att alla lyftskruvar är ordentligt åtdragna med hjälp av de medföljande verktygen.
11. Använd pedalerna för att justera önskat höjdivtervall för lyftens underrede.

TEKNISKA EGENSKAPER

HANDTAGETS HÖJD FRÅN MARKEN	115 cm
INGÅNGSSPÄNNING	220 V – 50 Hz
MOTOR	24 V
MAXIMAL PATIENTVIKT	150 kg
LYFTENS VIKT	43 kg

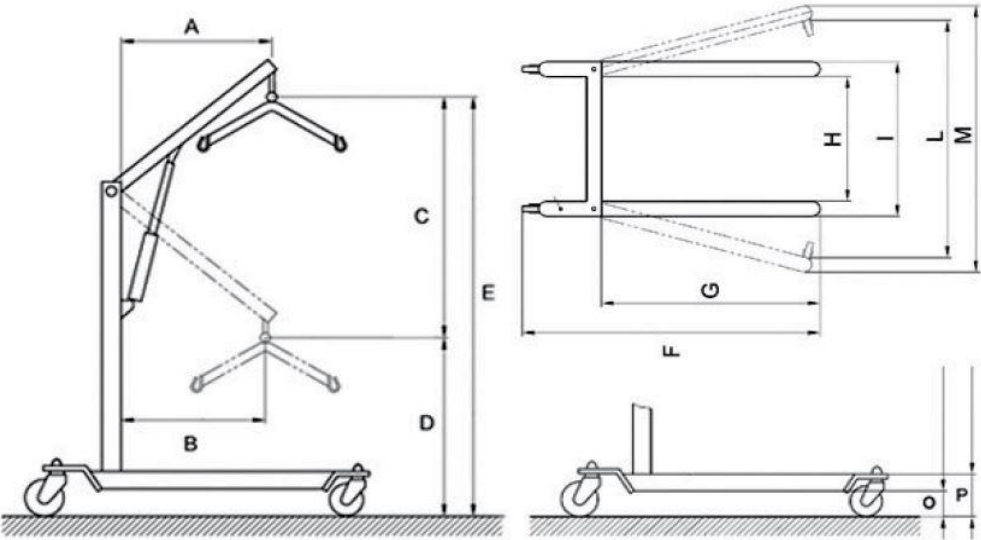

A	94cm*	G	83cm
B	27cm	H	48cm
C	157cm	I	58cm
D	27cm	L	75cm
E	183cm	M	85cm
F	117cm	O	5.5cm
		P	11cm

*ARMENS LÄNGDMÅTT

RAPPORTERING AV TILLBUD:

Alla allvarliga tillbud som inträffar i samband med användningen av produkten måste rapporteras till tillverkaren och en behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är bosatt.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- ☐ Läs och förstå dessa anvisningar innan du monterar eller använder denna produkt. Om du inte förstår någon del av dessa anvisningar, kontakta vårdpersonal för anvisningar om hur produkten ska användas.
- ☐ Om lyften inte monteras korrekt kan det leda till personskada.
- ☐ Kontrollera skruvarna regelbundet och dra åt dem vid behov.
- ☐ Om delar är skadade eller saknas, kontakta omedelbart din återförsäljare. Använd INTE andra reservdelar. Användning av icke-originalreservdelar kan orsaka personskador eller skador på lyften.
- ☐ Utsätt inte produkten för temperaturer över 40 °C under längre tid, eftersom detta kan skada produkten och därmed orsaka personskador hos användaren.
- ☐ MOBIAC SA tar inget ansvar för skador på egendom eller personskador som orsakas av felaktig montering eller felaktig användning av denna produkt.
- ☐ Se till att produkten har monterats korrekt enligt anvisningarna och att alla delar är ordentligt fastgjorda innan den tas i bruk.

RENGÖRING OCH DESINFEKTION

Använd endast en fuktig trasa och mild tvål på ytor som behöver rengöras.

Torka sedan noggrant innan du använder produkten.

Om du måste desinficera produkten, använd ett vanligt, mildt desinfektionsmedel.

Använd aldrig syror, alkalier eller lösningsmedel såsom aceton eller upplösande vätskor.

VIKTIGT (!)

Om produkten är skadad eller inte fungerar som den ska, kontakta en auktoriserad och utbildad representant.

Vid strömavbrott ska du trycka in röda säkerhetsknappen och vrida lyftröret för hand.

I nödfall, tryck på den röda säkerhetsknappen.

OBSERVERA (!)

Det är förbjudet att använda följande produkt för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning.

MOBIAK SA fransäger sig allt ansvar för skador till följd av felaktig användning av produkten eller användning som avviker från vad som anges i denna manual.

MOBIAK SA förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produkten och i denna manual i syfte att förbättra dess egenskaper.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi är ensamt ansvariga för att försäkra att de medicintekniska produkter som nämns i detta uttalande tillhör låg riskklass (klass I) och uppfyller kraven i den europeiska förordningen 745/2017 samt, i tillämpliga fall, de standarder och den lagstiftning som hänvisas till.



MILJÖSKYDD

Om du en dag upptäcker att produkten behöver bytas ut eller inte längre är användbar för dig, tänk på att skydda miljön:

- 1) Släng inte produkten tillsammans med övrigt kommunalt avfall (detta är också betydelsen av återvinningssymbolen i listan).
- 2) Kontakta lokala myndigheter för information om var produkten ska återvinnas.
- 3) Genom att lämna in den uttjänta produkten på rätt återvinningsplats bidrar du till att skydda miljön och säkerställer en korrekt materialhantering av produkten.
- 4) De elektriska produkterna kan, på grund av sina konstruktionsmaterial, utgöra en miljö- och hälsorisk om de inte kasseras på rätt sätt.

Produkten omfattas av garanti under två* (2) år från inköpsdatumet.

Garantin täcker tillverkningsfel, men täcker **INTE** skador som uppstår till följd av felaktig användning, bristfällig skötsel, modifiering, överanvändning eller bristande efterlevnad av produktens bruksanvisning. Garantin täcker **INTE** heller delar som kan slitas ut under användning eller med tiden.

Skador eller defekter orsakade av naturkatastrofer, obehörigt underhåll eller obehöriga reparationer, försörjningsproblem (i tillämpliga fall) samt transportörer omfattas inte av garantin.

*** Batteriet har sex (6) månaders garanti.**

Formulär för garantianspråk

Köparens uppgifter

Namn:

Inköpsdatum: SN.....

LOT: Telefon:

Återförsäljarens uppgifter

Namn:
.....

Adress:
.....

Telefon:

Återförsäljarens stämpel



MOBIAC S.A

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA – CRETE

TEL: +30 28210 63222 | WEBB: www.mobiakcare.com



Beskrivning av symboler som har tryckts på etiketten, huvudkartongen och/eller i bruksanvisningen



Medicinteknisk produkt



CE-märkning



Tillverkare



Produktionsdatum



Produktnummer



Läs bruksanvisningen



Serienummer



Använd inte om förpackningen är skadad



Batchnummer



Rätt sida upp



Unik produktidentifierare



Skyddas mot solljus



Förvaras torrt



Staplingshöjd



Hanteras varsamt



Ömtålig



Endast för inomhusbruk



Direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning