



GR EN

MOBIAC®

MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977



BRUKSANVISNING: ELEKTRISK PATIENTLYFT "ELYROS"

REF: 0811880

Läs bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk.
Viktiga säkerhetsanvisningar

PRODUKTBESKRIVNING – AVSEDD ANVÄNDNING

Denna enhet är avsedd för att lyfta och förflytta personer med rörelsehinder. Lyften är lämplig för användning både på sjukhus och i hemmet.

VAR FÖRSIKTIG: Lyften har en maximal lastkapacitet på 200 kg. Överskrid inte denna gräns.


Lyften har bromsar på bakhjulen.

MONTERING


Packa varsamt upp alla delar och lägg dem ned.




- Ta av mutterhättorna från skruvarna och muttrarna så att du kan använda den medföljande insexnyckeln.
- Anslut stödpelaren till underredet genom att fästa den med skruvarna "A" och "B" som är markerade nedan och dra åt dem med den medföljande skruvnyckeln.

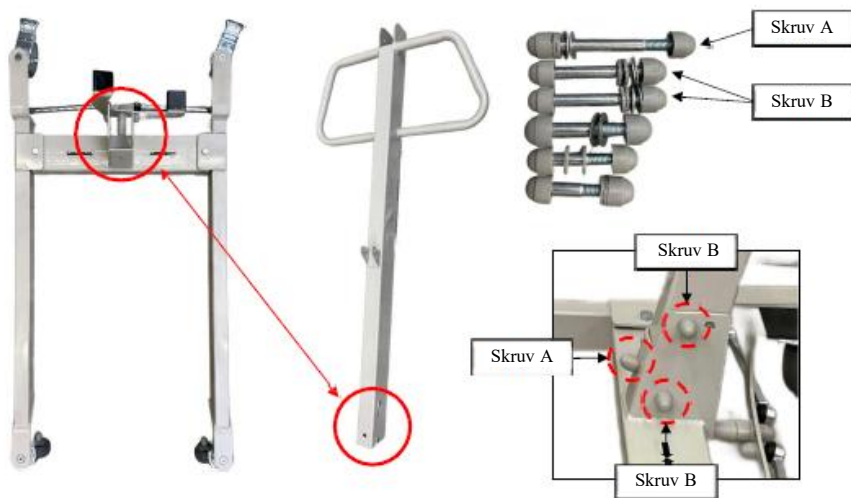

- Anslut lyftarmen till stödpelaren med skruv "C".

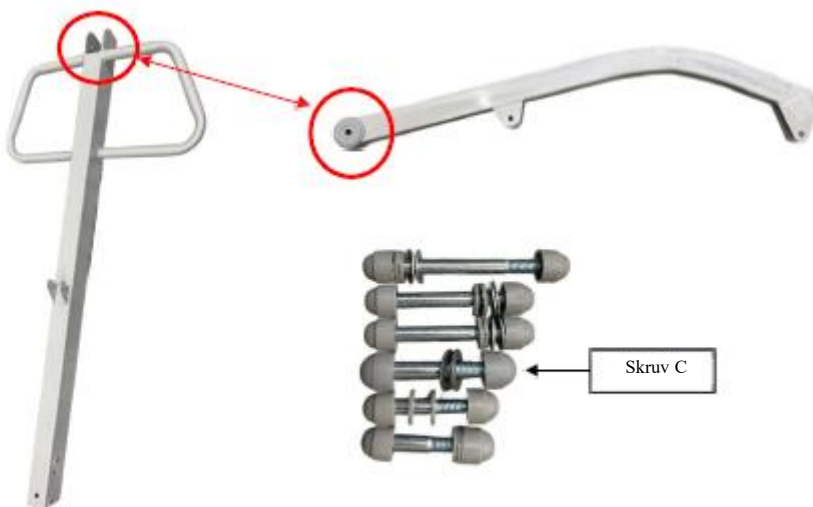


- Anslut ställdonets ändar till skarven på stödpelaren och stödarmen med hjälp av skruvarna "D".

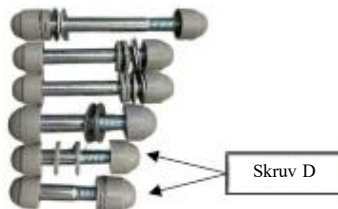

- Avlägsna skruven som sitter på lyftarmen med krokarna.
- Anslut lyftarmen med krokarna till änden av lyftarmens underrede och dra åt skruven med den medföljande skruvnyckeln.



- Dra ut batteriet (se nästa sida) så att de två hålen mitt på batteriramen (blå cirklar, fig. 1) syns.
- Placera batteriramens baksida (fig. 3) på stödkonsolen som är fäst vid huvudpelaren (fig. 2) och skjut den nedåt så att de fyra metallutskotten passar in i ramens fyra hål (röda cirklar).
- För att förhindra att batteriramen lossnar från huvudpelaren, skruva fast de två medföljande skruvarna i hålen (blå cirklar).

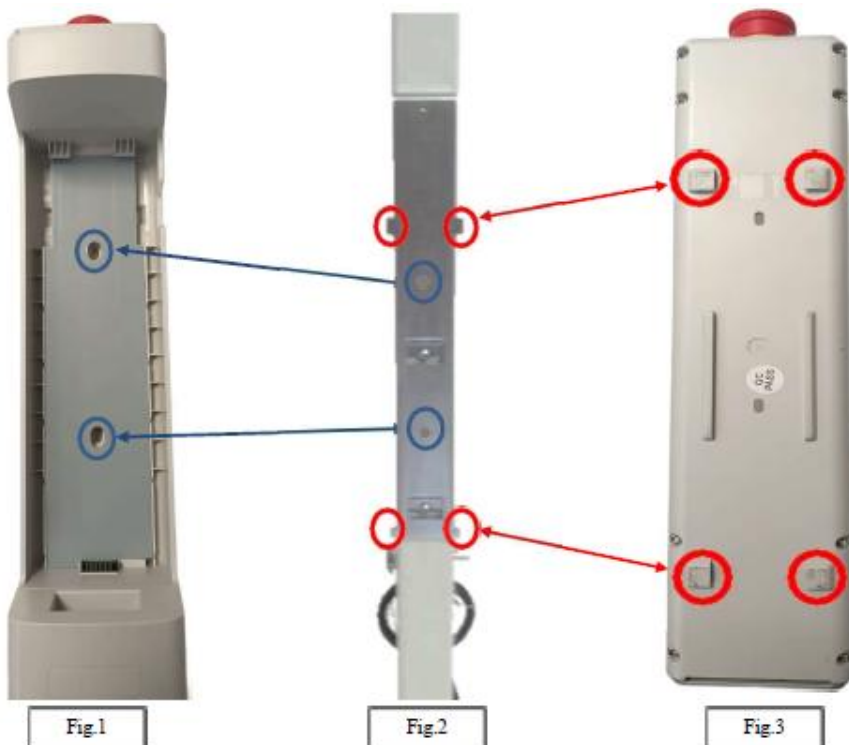

- Anslut handkontrollkabeln till styrenheten genom att sätta i den 5-poliga kontakten i rätt uttag (HC), och anslut ställdonet till styrenheten genom att sätta i den 4-poliga kontakten i rätt uttag (M1).




- För att ta ut batteriet, tryck på spaken upptill och lyft ut batteriet enligt bilden.



TEKNISKA EGENSKAPER

Ingångsspänning	220 V – 50 Hz
Produktvikt (kg)	42
Maximal belastning (kg)	200
Maximal lyftarmshöjd (övre änden) [A] (cm)	200
Minsta och högsta lyfthöjd (avståndet mellan lyftarmens krokar och marken) [B] (cm)	90–172
Höjd från marken till underredets undersida [C] (cm)	4,5
Höjd från marken till underredets ovansida [D] (cm)	11
Minsta djup [E] (cm)	125
Underredets innerlängd [F] (cm)	80
Minsta innerbredd på stängt underrede [G] (cm)	49
Minsta ytterbredd på stängt underrede [H] (cm)	60
Böjningsradiens intervall [I] (cm)	131
Innerbredd på öppet underrede [L] (cm)	80
Ytterbredd på öppet underrede [M] (cm)	91
Framhjulets diameter (cm)	7,5
Bakhjulets diameter med bromsar (cm)	10

TEKNISKA EGENSKAPER

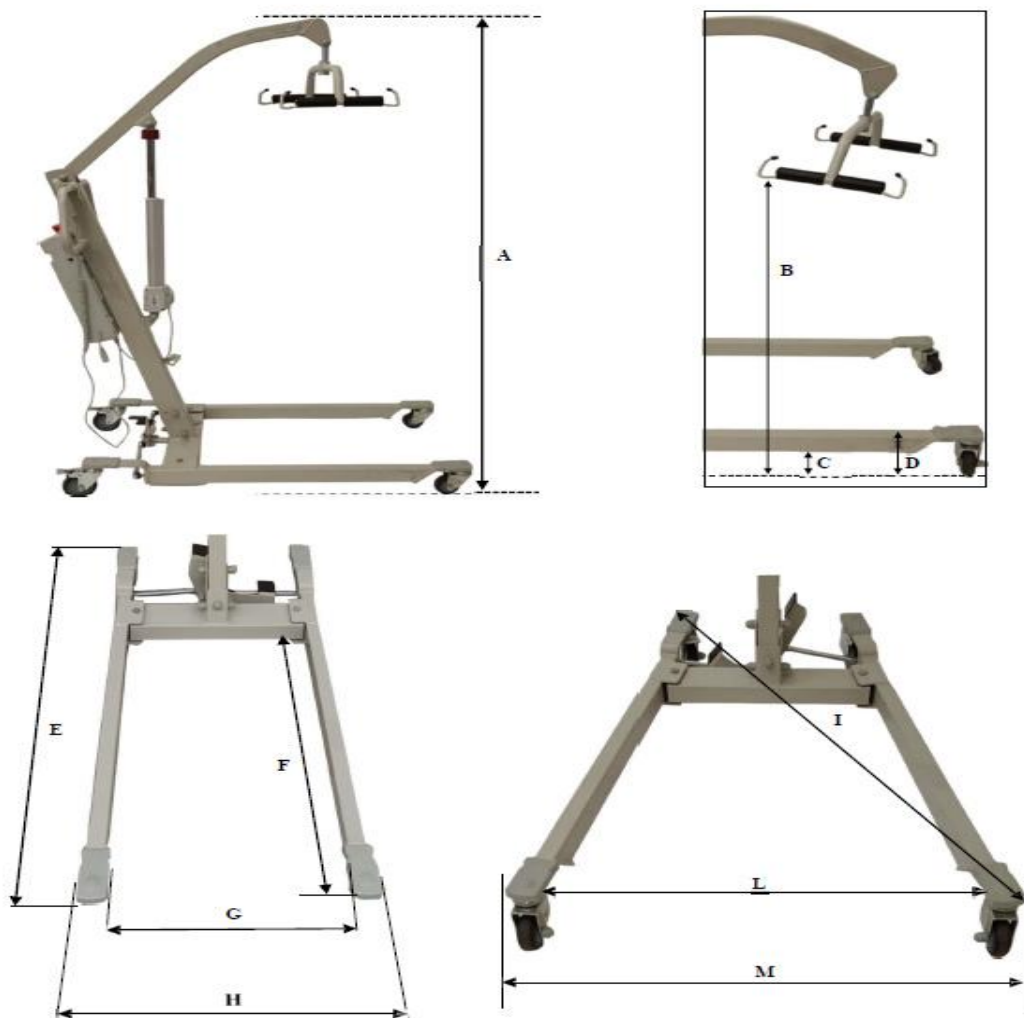

RAPPORTERING AV TILLBUD:

Alla allvarliga tillbud som inträffar i samband med användningen av produkten måste rapporteras till tillverkaren och en behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är bosatt



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- ☐ Läs och förstå dessa anvisningar innan du monterar eller använder denna produkt. Om du inte förstår någon del av dessa anvisningar, kontakta vårdpersonal för anvisningar om hur produkten ska användas.
- ☐ Om lyften inte monteras korrekt kan det leda till personskada.
- ☐ Kontrollera skruvarna regelbundet och dra åt dem vid behov.
- ☐ Om delar är skadade eller saknas, kontakta omedelbart din återförsäljare. Använd INTE andra reservdelar. Användning av icke-originalreservdelar kan orsaka personskador eller skador på lyften.
- ☐ Utsätt inte produkten för temperaturer över 40 °C under längre tid, eftersom detta kan skada produkten och därmed orsaka personskador hos användaren.
- ☐ MOBIAC SA tar inget ansvar för skador på egendom eller personskador som orsakas av felaktig montering eller felaktig användning av denna produkt.
- ☐ Se till att produkten har monterats korrekt enligt anvisningarna och att alla delar är ordentligt fastgjorda innan den tas i bruk

RENGÖRING OCH DESINFEKTION

Använd endast en fuktig trasa och mild tvål på ytor som behöver rengöras.

Torka sedan noggrant innan du använder produkten.

Om du måste desinficera produkten, använd ett vanligt, mildt desinfektionsmedel.

Använd aldrig syror, alkalier eller lösningsmedel såsom aceton eller upplösande vätskor.

VIKTIGT (!)

Om produkten är skadad eller inte fungerar som den ska, kontakta en auktoriserad och utbildad representant

Vid strömavbrott ska du trycka in röda säkerhetsknappen och vrida lyftroret för hand.

I nödfall, tryck på den röda säkerhetsknappen.

OBSERVERA (!)

Det är förbjudet att använda följande produkt för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning

MOBIAK SA fransäger sig allt ansvar för skador till följd av felaktig användning av produkten eller användning som avviker från vad som anges i denna manual.

MOBIAK SA förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produkten och i denna manual i syfte att förbättra dess egenskaper.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi är ensamt ansvariga för att försäkra att de medicintekniska produkter som nämns i detta uttalande tillhör låg riskklass (klass I) och uppfyller kraven i den europeiska förordningen 2017/745 samt, i tillämpliga fall, de standarder och den lagstiftning som hänvisas till.



MILJÖSKYDD

Om du en dag upptäcker att produkten behöver bytas ut eller inte längre är användbar för dig, tänk på att skydda miljön:

- 1) Släng inte produkten tillsammans med övrigt kommunalt avfall (detta är också betydelsen av återvinningssymbolen i listan).
- 2) Kontakta lokala myndigheter för information om var produkten ska återvinnas.
- 3) Genom att lämna in den uttjänta produkten på rätt återvinningsplats bidrar du till att skydda miljön och säkerställer en korrekt materialhantering av produkten
- 4) De elektriska produkterna kan, på grund av sina konstruktionsmaterial, utgöra en miljö- och hälsorisk om de inte kasseras på rätt sätt.

Produkten omfattas av garanti under två* (2) år från inköpsdatumet.

Garantin täcker tillverkningsfel, men täcker **INTE** skador som uppstår till följd av felaktig användning, bristfällig skötsel, modifiering, överanvändning eller bristande efterlevnad av produktens bruksanvisning. Garantin täcker **INTE** heller delar som kan slitas ut under användning eller med tiden.

Skador eller defekter orsakade av naturkatastrofer, obehörigt underhåll eller obehöriga reparationer, försörjningsproblem (i tillämpliga fall) samt transportörer omfattas inte av garantin.

* Batteriet har sex (6) månaders garanti.

Formulär för garantianspråk

Köparens uppgifter

Namn:

Inköpsdatum:SN.....

LOT:Telefon:

Återförsäljarens uppgifter

Namn:
.....

Adress:
.....

Telefon:

Återförsäljarens stämpel



MOBIAM S.A.

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA – CRETE

TEL: +30 28210 63222 | WEBB: www.mobiakcare.com



Beskrivning av symboler som har tryckts på etiketten, huvudkartongen och/eller i bruksanvisningen

	Medicinteknisk produkt		CE-märkning
	Tillverkare		Produktionsdatum
	Produktnummer		Läs bruksanvisningen
	Serienummer		Använd inte om förpackningen är skadad
	Batchnummer		Rätt sida upp
	Unik produktidentifierare		Skyddas mot solljus
	Förvaras torrt		Staplingshöjd
	Hanteras varsamt		Ömtålig
	Endast för inomhusbruk		Direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning