
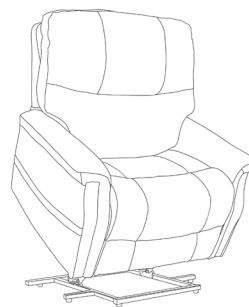
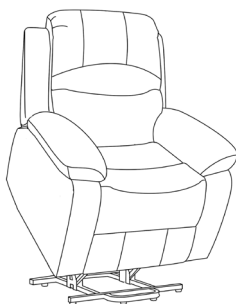


ANVISNINGAR OCH SPECIFIKATIONER

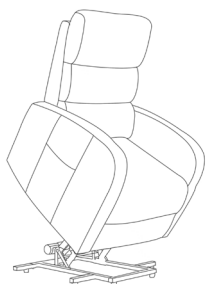

REF.	BESKRIVNING
0815700	FÄLLBAR FÅTÖLJ CINNAMON I
0815701	FÄLLBAR FÅTÖLJ CLOUD I
0815702	FÄLLBAR FÅTÖLJ CINNAMON II
0815703	FÄLLBAR FÅTÖLJ CLOUD II
0815704	FÄLLBAR FÅTÖLJ CLOUD XXL
0815708	FÄLLBAR FÅTÖLJ MED VIBRATIONSMASSAGE
0815735	FÄLLBAR FÅTÖLJ NYX II

	0815700	0815701	0815702	0815703	0815704	0815708	0815735
ÖVERDRAGSMATERIAL	MJUKT CHENILLETYG, VATTENTÄTT	MJUKT CHENILLETYG, VATTENTÄTT	MJUKT CHENILLETYG, VATTENTÄTT	MJUKT CHENILLETYG, VATTENTÄTT	MJUKT CHENILLETYG, VATTENTÄTT	PU-LÄDER (SYNTETISKT LÄDER), VATTENTÄTT OCH FLÄCKAVVISANDE	PU-LÄDER (SYNTETISKT LÄDER), VATTENTÄTT OCH FLÄCKAVVISANDE
INNERFODER	HÖGDENSITETSSKUM – SITSEN HAR EN DENSITET PÅ 35D OCH EN HÄRDHET PÅ 70)	HÖGDENSITETSSKUM – SITSEN HAR EN DENSITET PÅ 35D OCH EN HÄRDHET PÅ 70)	HÖGDENSITETSSKUM – SITSEN HAR EN DENSITET PÅ 35D OCH EN HÄRDHET PÅ 70)	HÖGDENSITETSSKUM – SITSEN HAR EN DENSITET PÅ 35D OCH EN HÄRDHET PÅ 70)	HÖGDENSITETSSKUM – SITSEN HAR EN DENSITET PÅ 35D OCH EN HÄRDHET PÅ 50)	HÖGDENSITETSSKUM – SITSEN HAR EN DENSITET PÅ 35D OCH EN HÄRDHET PÅ 70)	HÖGDENSITETSSKUM – SITSEN HAR EN DENSITET PÅ 35D OCH EN HÄRDHET PÅ 70)
SIDFICKOR	JA, MED SIDFICKA	JA, MED SIDFICKA	JA, MED SIDFICKOR	JA, MED SIDFICKOR	JA, MED SIDFICKOR	JA, MED SIDFICKOR	JA, MED SIDFICKOR

GLOBALT HUVUDKONTOR:
AKROTIRI CHANIA CRETE P.C 73100
TEL: +30 28210 63222



DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA, SÖDRA OCH INRE GREKLAND:
SXINEZA ASPROPIRGOS, Attica P.C 19300
TEL: +30 210 4614006

DISTRIBUTIONSCENTRAL: NORRA GREKLAND OCH BALKANOMRÅDET:
8 ARKADIOU STR. KALOCHORI, THESSALONIKI P.C 57009
TEL: +30 2310 785668

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA OCH ÖSTRA KRETA:
P' STR. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION
CRETE, P.C 71601, TEL: +30 2810 333151

	0815700	0815701	0815702	0815703	0815704	0815708	0815735
STYRENHET							
USB-PORT PÅ STYRENHETEN	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
KOPPHÅLLARE	-	-	-	-	NAI / JA	-	-
MAXIMAL BELASTNING	135 kg	135 kg	150 kg	150 kg	250 kg	135 kg	150 kg
MOTORER	1	1	2	2	2	1	2
HJUL	2 UTAN BROMSAR	2 UTAN BROMSAR	2 MED BROMSAR	2 MED BROMSAR	2 MED BROMSAR	2 UTAN BROMSAR	2 MED BROMSAR

MÅTT:

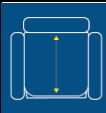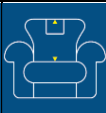												
0815700	52 cm	50 cm	67,5 cm	70 cm	73 cm	110 cm	126 cm	166 cm	113 cm	135 kg	45 kg	
0815701	52 cm	50 cm	67,5 cm	70 cm	73 cm	110 cm	126 cm	166 cm	113 cm	135 kg	45 kg	
0815702	50 cm	54 cm	67,5 cm	80 cm	74 cm	104 cm	126 cm	166 cm	114 cm	150 kg	51 kg	
0815703	50 cm	54 cm	67,5 cm	80 cm	74 cm	104 cm	126 cm	166 cm	114 cm	150 kg	51 kg	
0815704	75 cm	55 cm	67,5 cm	112 cm	92 cm	110 cm	127 cm	167 cm	132 cm	250 kg	64 kg	
0815708	52 cm	50 cm	67,5 cm	70 cm	73 cm	110 cm	126 cm	166 cm	113 cm	135 kg	45 kg	
0815735	50 cm	54 cm	67,5 cm	80 cm	74 cm	104 cm	126 cm	166 cm	114 cm	150 kg	51 kg	

GLOBALT HUVUDKONTOR:
AKROTIRI CHANIA CRETE P.C 73100
TEL: +30 28210 63222

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA, SÖDRA OCH
INRE GREKLAND:
SXINEZA ASPROPIRGOS, Attica P.C 19300
TEL: +30 210 4614006

DISTRIBUTIONSCENTRAL: NORRA GREKLAND OCH
BALKANOMRÅDET:
8 ARKADIOU STR. KALOCHORI, THESSALONIKI P.C 57009
TEL: +30 2310 785668

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA OCH ÖSTRA
KRETA:
P' STR. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION
CRETE, P.C 71601, TEL: +30 2810 333151

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV KLÄDSEL

CHENILLETYG

Koppla alltid ur fåtöljen innan rengöring och koppla inte in den igen förrän den är helt torr. Låt aldrig vatten komma i kontakt med elektriska delar.

- ✓ **Daglig rengöring:** Rengör de ytor som behöver rengöras med en mild lösning av tvål och ljummet vatten och torka med en mjuk, luddfri trasa. Använd en dammsugare med möbelmunstycke för att ta bort damm, smuts och skräp från tyget. Se till att täcka alla ytor, inklusive sömmar.

Desinfektion: Blanda en lösning med 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten. Alternativt kan du använda ett textilvänligt desinfektionsmedel (se till att det är lämpligt för möbeltyger). För en skonsammare metod kan du använda en blandning av varmt vatten och mild tvål (eller textilrengöringsmedel).

- Innan du applicerar lösningen på hela fåtöljen bör du testa den på ett litet, omärkbart område för att säkerställa att tyget inte missfärgas eller skadas.
 - Spreja desinfektionslösningen lätt på tyget med en sprejflaska. Undvik att tyget blir genomblött. Om du använder sprit eller en desinfektionssprej, se till att applicera den jämnt och låta tyget lufttorka.
 - Efter att du har applicerat desinfektionsmedlet ska du låta fåtöljerna lufttorka helt. Undvik direkt värme eller solljus, eftersom det kan skada tyget.
 - För en mer grundlig rengöring kan du använda en ångrengörare med ett tillbehör för möbelkläder för att desinficera tyget. Ångan hjälper till att döda bakterier och virus utan användning av starka kemikalier.
 - När fåtöljerna är torra, dammsug dem igen för att få bort eventuella ludd från tyget.
- ✓ **Fläckborttagning:** Vissa mindre fläckar kan avlägsnas med mild rengöringsmedel. Spreja en fuktig trasa med rengöringsmedlet och torka försiktigt bort fläckarna, skölj med ljummet vatten och torka med en mjuk, luddfri trasa. Mer envisa fläckar kan kräva professionell rengöring.

Obs! Använd aldrig starka slipande rengöringsmedel eller starka kemikalier för att rengöra produkten, eftersom detta kan orsaka omfattande slitage på klädseln. Undvik att använda polermedel för klädsel, eftersom dessa kan skada den.

GLOBALT HUVUDKONTOR:
AKROTIRI CHANIA CRETE P.C 73100
TEL: +30 28210 63222

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA, SÖDRA OCH
INRE GREKLAND:
SXINEZA ASPROPIRGOS, Attica P.C 19300
TEL: +30 210 4614006

DISTRIBUTIONSCENTRAL: NORRA GREKLAND OCH
BALKANOMRÅDET:
8 ARKADIOU STR. KALOCHORI, THESSALONIKI P.C 57009
TEL: +30 2310 785668

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA OCH ÖSTRA
KRETA:
P' STR. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION
CRETE, P.C 71601, TEL: +30 2810 333151

KLÄDSEL I PU-LÄDER

Koppla alltid ur fåtöljen innan rengöring och koppla inte in den igen förrän den är helt torr. Låt aldrig vatten komma i kontakt med elektriska delar.

1. Regelbunden rengöring: Rengör läderytan regelbundet med en mjuk, fuktig trasa för att få bort damm och smuts. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande material, eftersom de kan skada lädret.
2. Använd ett läderrengöringsmedel: För mer envisa fläckar bör ett speciellt läderrengöringsmedel lämpat för andningsbart läder användas. Följ anvisningarna på rengöringsmedlet för att säkerställa korrekt användning.
3. Balsamera lädret: Applicera ett läderbalsam eller skyddsmedel med några månaders mellanrum för att hålla lädret mjukt och spänstigt. Detta kan också bidra till att skydda lädret mot vatten och fläckar.
4. Undvik direkt solljus: Försök att undvika att utsätta andningsbart läder för direkt solljus under längre perioder, eftersom detta kan orsaka blekning och uttorkning.
5. Håll det torrt: Håll lädret torrt och undvik långvarig kontakt med vatten. Om det ändå blir blött, torka det försiktigt med en mjuk trasa och låt det lufttorka.
6. Förvara på rätt sätt: Förvara fåtöljerna på en sval, torr plats med god luftcirkulation. Undvik att förvara dem i direkt solljus eller nära värmekällor, vilket kan orsaka blekning och sprickbildning.
7. Undvik vassa föremål: Var noga med att undvika kontakt med vassa föremål som kan repa eller punktera fåtöljen.
8. Undvik starka kemikalier: starka kemikalier och blekmedel kan skada läderfibrerna och orsaka missfärgning. Använd alltid milda, skonsamma rengöringsmedel.
9. Sörj för god ventilation: Se till att fåtöljen förvaras i ett välventilerat utrymme för att förhindra mögel- och svampbildning.

Obs! Använd aldrig starka slipande rengöringsmedel eller starka kemikalier för att rengöra produkten, eftersom detta kan orsaka omfattande slitage på klädseln. Undvik att använda polermedel för klädsel, eftersom dessa kan skada den.

GLOBALT HUVUDKONTOR:
AKROTIRI CHANIA CRETE P.C 73100
TEL: +30 28210 63222

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA, SÖDRA OCH
INRE GREKLAND:
SXINEZA ASPROPIRGOS, Attica P.C 19300
TEL: +30 210 4614006

DISTRIBUTIONSCENTRAL: NORRA GREKLAND OCH
BALKANOMRÅDET:
8 ARKADIOU STR. KALOCHORI, THESSALONIKI P.C 57009
TEL: +30 2310 785668

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA OCH ÖSTRA
KRETA:
P' STR. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION
CRETE, P.C 71601, TEL: +30 2810 333151

FÖRDELAR MED KLÄDSEL I PU-LÄDER

1. Andningsbara materialegenskaper: Låter luften cirkulera och hjälper till att förhindra fuktansamling.
2. Behagligt att ta på: Det är mjukt och lent vid beröring, vilket ger hög komfort.
3. Slitstarkt: Lädret håller länge och är mycket slitstarkt.
4. Hög vattenbeständighet: Det har god vattenbeständighet, vilket förhindrar att vatten tränger in och skadar lädret.
5. Utmärkt elasticitet: Det har utmärkt elasticitet, vilket gör att det återgår till sin ursprungliga form efter att ha sträckts ut eller pressats ihop.
6. Naturligt utseende: PU-läders naturliga struktur och utseende bibehålls, vilket ger det ett unikt och elegant utseende.
7. Bra isolering: Det andningsbara lädret har goda isoleringsegenskaper, vilket kan bidra till att upprätthålla en konstant temperatur.
8. Lätt att rengöra: Det är relativt enkelt att rengöra och underhålla, eftersom smuts och fläckar kan avlägsnas med en fuktig trasa.
11. Håller länge: Med rätt skötsel kan läderprodukter hålla länge och behålla sitt utseende och sin kvalitet över tid.
12. Miljövänligt: Eftersom det är ett naturmaterial är det mer miljövänligt än vissa syntetiska material.

GLOBALT HUVUDKONTOR:
AKROTIRI CHANIA CRETE P.C 73100
TEL: +30 28210 63222

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA, SÖDRA OCH INRE GREKLAND:
SXINEZA ASPROPIRGOS, Attica P.C 19300
TEL: +30 210 4614006

DISTRIBUTIONSCENTRAL: NORRA GREKLAND OCH BALKANOMRÅDET:
8 ARKADIOU STR. KALOCHORI, THESSALONIKI P.C 57009
TEL: +30 2310 785668

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA OCH ÖSTRA KRETA:
P' STR. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION
CRETE, P.C 71601, TEL: +30 2810 333151



VARNING

- Överbelasta inte produkten utöver den rekommenderade maximala belastningsgränsen. Detta kan leda till allvarliga skador på användaren.
- Använd inte alkoholbaserade rengöringsmedel vid rengöring av klädsel. Följ rengörings- och desinfektionsanvisningarna i denna manual.
- Se till att produkten står på en stabil, plan yta när den används.
- Hjulen håller fåtöljen på plats men låser inte fast den. Hjulen kanske inte fungerar lika bra på tjocka mattor.
- Se till att hjulen är i rätt position innan du sätter dig i eller reser dig ur fåtöljen.
- När fåtöljen är i upphöjt läge ska du inte plötsligt lägga din vikt på den, eftersom en kraftig stöt kan skada mekanismen.
- Koppla alltid ur fåtöljen innan du demonterar den för att undvika risken för elchock.
- Fjädrarna kan orsaka skador. Tänk på att exponerade delar av mekanismen kan röra sig snabbt och klämma fast fingrar eller armar och ben.
- Se till att fåtöljen är i perfekt skick innan du använder den. Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att kunna använda de rörliga delarna på rätt sätt.
- Sitt eller stå inte på fotstödet.
- Låt alltid fåtöljen stå i upprätt och stängt läge när den inte används.

GLOBALT HUVUDKONTOR:
AKROTIRI CHANIA CRETE P.C 73100
TEL: +30 28210 63222

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA, SÖDRA OCH INRE GREKLAND:
SXINEZA ASPROPIRGOS, Attica P.C 19300
TEL: +30 210 4614006

DISTRIBUTIONSCENTRAL: NORRA GREKLAND OCH BALKANOMRÅDET:
8 ARKADIOU STR. KALOCHORI, THESSALONIKI P.C 57009
TEL: +30 2310 785668

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA OCH ÖSTRA KRETA:
P' STR. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION
CRETE, P.C 71601, TEL: +30 2810 333151

MONTERINGSANVISNINGAR



- Packa försiktigt upp alla övriga delar och kontrollera att alla delar finns med.





- Två låsbara hjul med bromsar medföljer (för fåtöljens baksida). Ta ut dem ur förpackningen. Skruva loss låsmuttrarna från hjulens ovansida och trä in dem genom de avsedda hålen på fåtöljens undersida. Sätt tillbaka låsmuttrarna och dra åt dem.

GLOBALT HUVUDKONTOR:
AKROTIRI CHANIA CRETE P.C 73100
TEL: +30 28210 63222

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA, SÖDRA OCH INRE GREKLAND:
SXINEZA ASPROPIRGOS, Attica P.C 19300
TEL: +30 210 4614006

DISTRIBUTIONSCENTRAL: NORRA GREKLAND OCH BALKANOMRÅDET:
8 ARKADIOU STR. KALOCHORI, THESSALONIKI P.C 57009
TEL: +30 2310 785668

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA OCH ÖSTRA KRETA:
P' STR. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION
CRETE, P.C 71601, TEL: +30 2810 333151

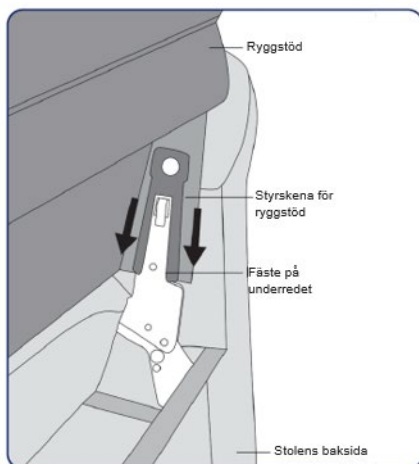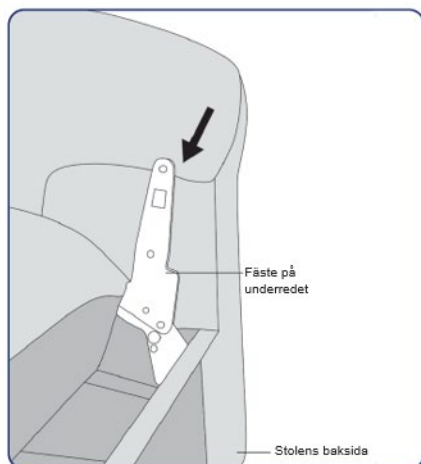



- Skjut fast ryggstödet på underredet med hjälp av styrskenorna på ryggstödet sidor.
- När de utskjutande delarna på underredet sitter i styrskenorna båda sidor av ryggstödet, tryck ner ryggstödet tills det "klickar" på plats.

GLOBALT HUVUDKONTOR:
 AKROTIRI CHANIA CRETE P.C 73100
 TEL: +30 28210 63222


DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA, SÖDRA OCH INRE GREKLAND:
 SXINEZA ASPROPIRGOS, Attica P.C 19300
 TEL: +30 210 4614006

DISTRIBUTIONSCENTRAL: NORRA GREKLAND OCH BALKANOMRÅDET:
 8 ARKADIOU STR. KALOCHORI, THESSALONIKI P.C 57009
 TEL: +30 2310 785668

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA OCH ÖSTRA KRETA:
 P' STR. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION
 CRETE, P.C 71601, TEL: +30 2810 333151

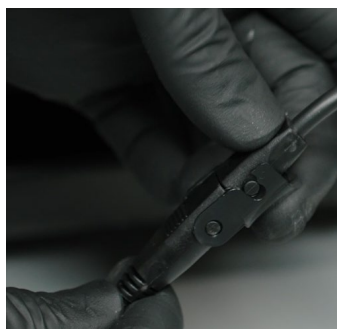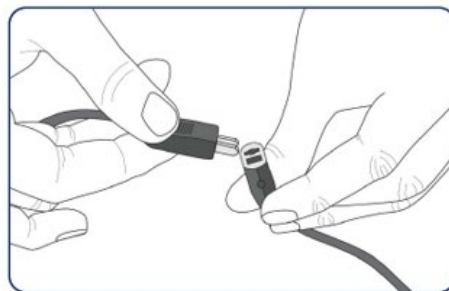

- Kontrollera att handenheten är ansluten till motorn. Anslut den i annat fall enligt bilderna ovan.

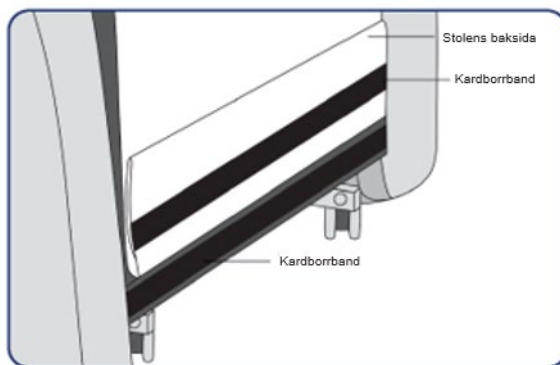

- Fäst tyget från ryggstödetts undersida till fåtöljens underrede med kardborrebanden.

GLOBALT HUVUDKONTOR:
 AKROTIRI CHANIA CRETE P.C 73100
 TEL: +30 28210 63222

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA, SÖDRA OCH INRE GREKLAND:
 SXINEZA ASPROPIRGOS, Attica P.C 19300
 TEL: +30 210 4614006

DISTRIBUTIONSCENTRAL: NORRA GREKLAND OCH BALKANOMRÅDET:
 8 ARKADIOU STR. KALOCHORI, THESSALONIKI P.C 57009
 TEL: +30 2310 785668

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA OCH ÖSTRA KRETA:
 P' STR. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION
 CRETE, P.C 71601, TEL: +30 2810 333151

HANDENHETER

HANDENHET FÖR FÅTÖLJ MED 1 MOTOR




Lyfta fåtöljen, höja ryggstödet och återställa fotstödet till ursprungsläget efter lutad position

Sänka fåtöljen, höja fotstödet och luta ryggstödet bakåt

HANDENHET FÖR FÅTÖLJ MED 2 MOTORER

Sänka fåtöljen, höja fotstödet

Lyfta fåtöljen, höja ryggstödet och återställa fotstödet till ursprungsläget efter lutad position

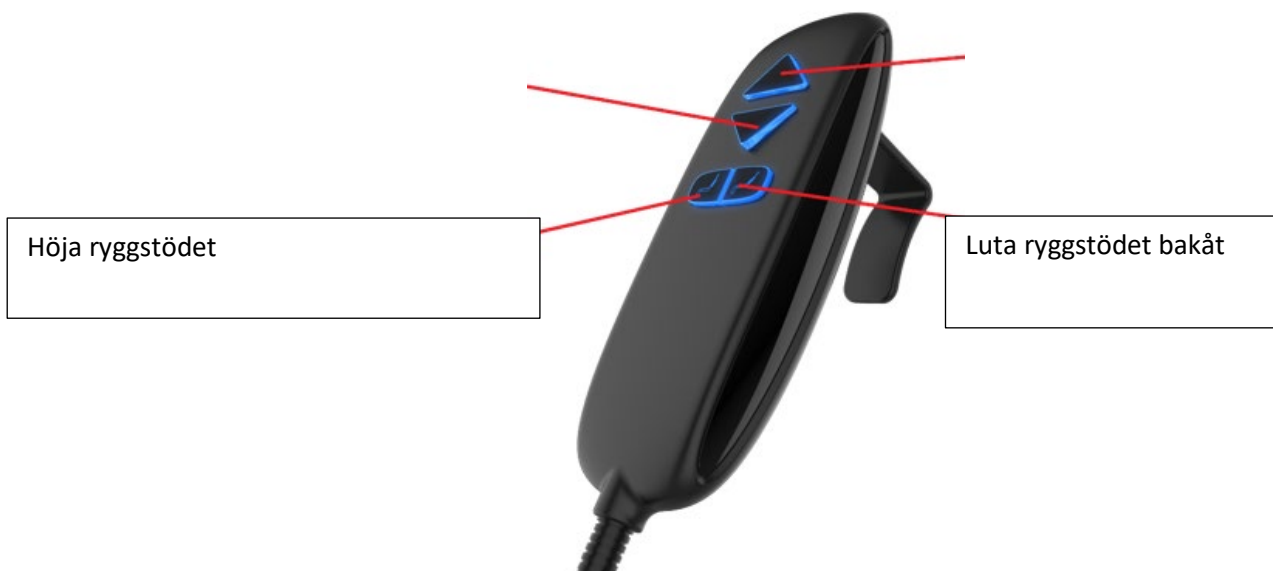

HANDENHET FÖR FÅTÖLJ MED 2 MOTORER – ENDAST FÖR KOD 0815704




GLOBALT HUVUDKONTOR:
 AKROTIRI CHANIA CRETE P.C 73100
 TEL: +30 28210 63222

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA, SÖDRA OCH INRE GREKLAND:
 SXINEZA ASPROPIRGOS, Attica P.C 19300
 TEL: +30 210 4614006

DISTRIBUTIONSCENTRAL: NORRA GREKLAND OCH BALKANOMRÅDET:
 8 ARKADIOU STR. KALOCHORI, THESSALONIKI P.C 57009
 TEL: +30 2310 785668

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA OCH ÖSTRA KRETA:
 P' STR. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION
 CRETE, P.C 71601, TEL: +30 2810 333151

HANDENHET FÖR MASSAGE- OCH VÄRMEFUNKTION ENDAST FÖR KOD 0815708

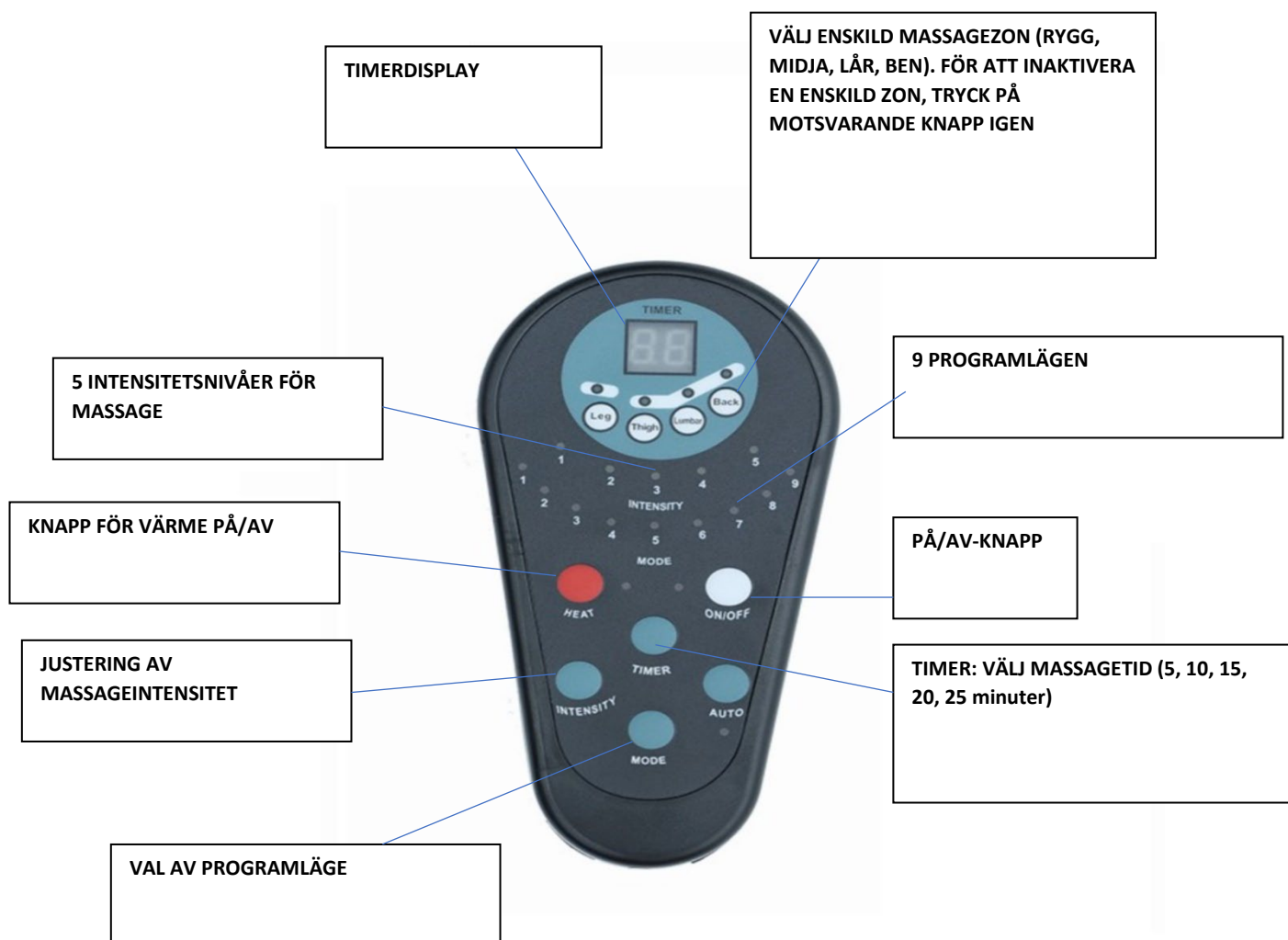

VARNING! MASSAGE- OCH VÄRMEFUNKTIONERNA BÖR ANVÄNDAS MAX 25 MINUTER I TAGET MED PAUSER PÅ 15 MINUTER DÄREMELLAN. OM PRODUKTEN ELLER STYRENHETEN ÖVERHETTAS, DRA UT KONTAKTEN OCH KONTAKTA DIN AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE.

GLOBALT HUVUDKONTOR:
AKROTIRI CHANIA CRETE P.C 73100
TEL: +30 28210 63222

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA, SÖDRA OCH
INRE GREKLAND:
SXINEZA ASPROPIRGOS, Attica P.C 19300
TEL: +30 210 4614006

DISTRIBUTIONSCENTRAL: NORRA GREKLAND OCH
BALKANOMRÅDET:
8 ARKADIOU STR. KALOCHORI, THESSALONIKI P.C 57009
TEL: +30 2310 785668

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA OCH ÖSTRA
KRETA:
P' STR. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION
CRETE, P.C 71601, TEL: +30 2810 333151

Alla handenheter är försedda med en snabbkoppling (placerad i fickan på fåtöljen) som gör det möjligt att ta av handenheten om den är defekt eller om du vill förhindra obehörig användning av fåtöljen. Var försiktig när du ansluter handenheten igen och se till att låskåpan sitter på plats och att kabeln sitter fast ordentligt.

SÄKER SITTPPOSITION

Innan du använder fåtöljens kontroll ska du se till att barn och husdjur inte kan fastna och att det inte finns några hinder i närheten av fåtöljen.

- Stå nära fåtöljen – tryck på knappen på fjärrkontrollen och höj fåtöljen till en bekväm höjd.
- Sätt dig i mitten av fåtöljen, se till att du sitter stadigt och sträck dig sedan bakåt tills du känner båda armstöden. Sänk sedan sätet genom att trycka på den avsedda knappen på fjärrkontrollen.



GLOBALT HUVUDKONTOR:
AKROTIRI CHANIA CRETE P.C 73100
TEL: +30 28210 63222


DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA, SÖDRA OCH INRE GREKLAND:
SXINEZA ASPROPIRGOS, Attica P.C 19300
TEL: +30 210 4614006

DISTRIBUTIONSCENTRAL: NORRA GREKLAND OCH BALKANOMRÅDET:
8 ARKADIOU STR. KALOCHORI, THESSALONIKI P.C 57009
TEL: +30 2310 785668

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA OCH ÖSTRA KRETA:
P' STR. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION
CRETE, P.C 71601, TEL: +30 2810 333151


www.mobiakcare.com

- När du är i önskad position, tryck och håll in knappen på kontrollen och sänk till sittläge. Släpp knappen när fåtöljen slutar röra sig.
- Om du inte håller rätt kroppsställning finns det risk för skador.

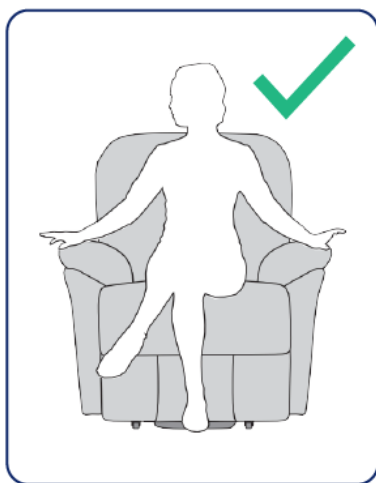

RÄTT KROPPSHÅLLNING

Sitt mitt i fåtöljen med händerna på armstöden

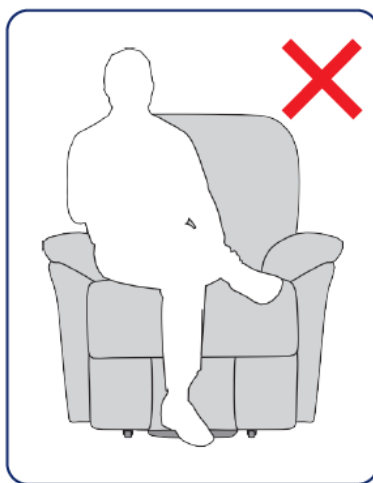

DÅLIG KROPPSHÅLLNING

Denna position utsätter mekanismen för överdriven belastning och gör fåtöljen instabil.



ANVÄNDA FÅTÖLJEN FÖR ATT STÄLLA SIG UPP

Tryck på knappen på styrenheten för att höja fåtöljen. Tänk på att sitta mitt i fåtöljen.

När du har nått en position där det är lätt för dig att ställa dig upp eller resa dig ur fåtöljen, släpp knappen.

Håll knappen intryckt för att sänka fåtöljen tillbaka till normalläget.

Förvara styrenheten i den medföljande fickan på sidorna av fåtöljen.

ALLMÄN FELSÖKNINGSGUIDE

Fåtöljen höjs inte.	1. Kontrollera att fåtöljen är ansluten till eluttaget och att uttaget fungerar som det ska. 2. Kontrollera att kabeln inte är skadad. Kontrollera säkringen i kontakten. Om säkringarna går efter byte, använd inte fåtöljen utan dra ut kontakten ur eluttaget. 3. Om fåtöljens mekanism används kontinuerligt under en kort tid kommer motorn att överhettas. Detta gör att säkerhetsbrytaren löser ut och fåtöljen slutar fungera. Vänta 10 till 15 minuter så kommer fåtöljen att fungera igen.
Ljudnivå	Det är normalt att motorerna vibrerar något och avger ljud. Det finns också många rörliga delar, och ljud kan höras vid användning av fåtöljen. Om ljudet är för högt, kontakta din auktoriserade återförsäljare.

GLOBALT HUVUDKONTOR:
AKROTIRI CHANIA CRETE P.C 73100
TEL: +30 28210 63222

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA, SÖDRA OCH INRE GREKLAND:
SXINEZA ASPROPIRGOS, Attica P.C 19300
TEL: +30 210 4614006

DISTRIBUTIONSCENTRAL: NORRA GREKLAND OCH BALKANOMRÅDET:
8 ARKADIOU STR. KALOCHORI, THESSALONIKI P.C 57009
TEL: +30 2310 785668

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA OCH ÖSTRA KRETA:
P' STR. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION
CRETE, P.C 71601, TEL: +30 2810 333151

www.mobiakcare.com

Rök	Koppla bort fåtöljen genom att dra ut kontakten ur eluttaget, vidta brandsäkerhetsåtgärder och kontakta din auktoriserade återförsäljare.
Motorn fortsätter att köras och stängs inte av.	Mekaniskt problem – kontakta din auktoriserade återförsäljare.

Checklista för mekaniska skador

- ✓ Koppla alltid ur fåtöljen innan du demonterar den för att undvika risken för elchock.
- ✓ Kontrollera alla kablar och anslutningar till transformatorn/nätaggregatet och styrenheten.
- ✓ Kontrollera att mekanismen fungerar korrekt och är i horisontellt läge vid höjning/sänkning.
- ✓ Se till att fåtöljen står på ett plant underlag och att fotstöden är inställda rätt.
- ✓ Kontrollera att fotstödet inte vidrör mattan.
- ✓ Kontrollera att det inte finns några tecken på läckage i fåtöljen – vid misstanke om detta, inspektera elsystemet under sitsen.
- ✓ Kontrollera om sittdynan är sliten på ena sidan – detta tyder på att man suttit fel vid höjning/sänkning.
- ✓ Kontrollera att styrskenorna är smorda och fungerar som de ska.
- ✓ Se till att inget har hamnat längs sidorna av armstöden, vilket kan få fåtöljen att fastna.
- ✓ Kontrollera att det inte finns några hinder under fåtöljen.
- ✓ Om ryggstödet är märkt innebär det att fåtöljen har kommit i kontakt med en vägg eller ett hinder.
- ✓ Om fåtöljen har värme- och massagefunktioner, kontrollera att elsystemet är säkert innan du kontrollerar att funktionerna fungerar som de ska.
- ✓ Kontrollera om det finns några skador på kablar eller tecken på överhettning och byt ut delar vid behov.

MILJÖSKYDD

Om du en dag upptäcker att produkten behöver bytas ut eller inte längre fungerar för dig, tänk på att skydda miljön:

- Släng inte produkten tillsammans med övrigt hushållsavfall (detta är också innebörden av den återvinningssymbol som visas).
- Kontakta de lokala myndigheterna för information om vilka återvinningscentraler produkten ska lämnas till.
- Korrekt avfallshantering av produkten bidrar till att skydda miljön och möjliggör återvinning av produktens komponenter.

GARANTI:

Produkten omfattas av garanti under tre (3) år från inköpsdatumet.

Garantin gäller för tillverkningsfel, men INTE för skador som uppstår till följd av felaktig användning, bristfällig skötsel, modifiering, överanvändning eller bristande efterlevnad av produktens bruksanvisning. Garantin gäller INTE heller för delar som kan slitas ut under användning eller med tiden.

Skador eller defekter orsakade av naturkatastrofer, obehörigt underhåll eller obehöriga reparationer, problem med strömförsörjningen (i tillämpliga fall) samt transportörer omfattas inte av garantin.

Ingen service och inga reservdelar tillhandahålls såvida inte produkten har inspekterats av en auktoriserad serviceavdelning eller tillverkaren. Fraktkostnader för varor som omfattas av garantin ska betalas av slutanvändaren, kunden eller återförsäljaren.

GARANTIFORMULÄR:

KÖPARENS UPPGIFTER:	
FULLSTÄNDIGT NAMN:	
INKÖPSDATUM:	
TELEFON:	
LOT- ELLER SERIENUMMER:	
ÅTERFÖRSÄLJARENS UPPGIFTER	
FULLSTÄNDIGT NAMN:	
ADRESS:	
TELEFON:	
STÄMPEL OCH UNDERSKRIFT	

GLOBALT HUVUDKONTOR:
AKROTIRI CHANIA CRETE P.C 73100
TEL: +30 28210 63222

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA, SÖDRA OCH
INRE GREKLAND:
SXINEZA ASPROPIRGOS, Attica P.C 19300
TEL: +30 210 4614006

DISTRIBUTIONSCENTRAL: NORRA GREKLAND OCH
BALKANOMRÅDET:
8 ARKADIOU STR. KALOCHORI, THESSALONIKI P.C 57009
TEL: +30 2310 785668

DISTRIBUTIONSCENTRAL: CENTRALA OCH ÖSTRA
KRETA:
P' STR. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION
CRETE, P.C 71601, TEL: +30 2810 333151