

1. Säkerhetsinformation

- Läs bruksanvisningen före första användningen.
- Använd inte rullstolen förrän den är helt monterad.
- Användning av rullstolen av personer som inte kan använda den självständigt rekommenderas inte.
- Maximal lastkapacitet får inte överstiga 120 kg.
- Rullstolen får endast användas av en person åt gången.
- Det rekommenderas att hålla fötterna på fotstödet och underarmarna på armstöden när du kör.
- Kontrollera alltid batterinivån på kontrollpanelen före användning.
- Denna elektriska rullstol bör endast användas på en plan yta eller på låga höjder. Den ska inte köras på en yta som lutar i en vinkel på mer än 8 grader.
- Kör inte rullstolen i maximal hastighet när du går uppför eller nedför.
- Använd inte rullstolen på mjuka och hala ytor som lera, sand etc.
- Åk inte rullstolen i sidled på högt upphöjda områden.
- Lagg inte någon extra last som släpvagn etc. på rullstolen.
- Reparera eller modifiera inte rullstolens konstruktion själv. Använd endast originalreservdelar från tillverkaren.
- Stå inte upp eller sätt dig ner på rullstolen när kontrollmodulen är påslagen.
- Använd inte rullstolen utan tippskydd.
- När frihjulsläget (manuellt) är på, gå inte på eller av rullstolen utan hjälp.
- Luta dig inte framåt för att ta tag i föremål som ligger framför, på sidan eller bakom rullstolen. Stå inte på fotstödet. Det kan leda till att rullstolen ramlar omkull.
- Undvik snabba riktningsändringar när du kör på höjder.
- Sakta alltid ner när du kör nedför eller gör svängar.
- Kontrollera före användning om hjulen är korrekt monterade.
- Gör inte plötsliga rörelser när du använder joysticken.
- Vid förvaring, skydda rullstolen från regn och ogynnsamma väderförhållanden.
- Innan du slår på rullstolen, se till att spakarna är inställda på elektriskt läge.
- Undvik områden med horisontella mellanrum.
- Om rullstolen inte ska användas under en längre tid – ta bort batteriet.

- Använd inte rullstolen på vägen. Det kan leda till en bilolycka.
- Förvara inte rullstolen på platser med höga temperaturer och luftfuktighet.

2. Produktbeskrivning och tillämpning

Elektrisk rullstol är designad för personer som har problem med rörlighet och hjälper handikappade patienter med deras vardagliga sysslor. Den kan ersätta en vanlig rullstol.

Elektrisk rullstol är lämplig för patienter med:

- funktionshinder, som har problem med oassisterad rörelse,
- funktionsstörningar och nedsatt rörlighet,
- hjärt- och kärlsjukdomar,
- försvagad kropp på grund av hög ålder.

A. RULLSTOLENS ELEMENT



1. Hantera
2. Ryggstöd
3. Plats
4. Armstöd
5. Styrmodul
6. Stödhjul för transport
7. Bak hjul 12"
8. Framhjul 8 "
9. Fotstöd



- 10. Väska
- 11. Säkerhetsspänne
- 12. Montering skruva
- 13. Fällbar knapp
- 14. Litium batteri
- 15. Motorspakar (läge) .



B. PRODUKTENS EGENSKAPER

- Aluminium, hopfällbar ram
- Rejåla 12" och främre 8" hjul
- Kontrollmodul: på/av-knapp, styrspak, signalhornsknapp, hastighetsjustering, batterinivåindikator, mute-knapp
- Säker och pålitlig elektromagnetisk broms
- Helt stängt, underhållsfritt batteri
- Säkerhetsbälte och tippskyddshjul
- Ficka för smågods placerad baktill
- Två driftlägen: elektrisk och manuell
- Rem - för att fästa en ihopfälld rullstol

C. TEKNISKA PARAMETRAR

1. Produkttyp: för inomhus- och utomhusbruk
2. Maxhastighet: ≤ 6 [km/h]
3. Maximal kapacitet: 120 [kg]
4. Bromssträcka på horisontell yta: $\leq 0,8$ [m]
5. Max. räckvidd: 20-25 [km]

6. Batteri: litium, 24 [V] x 12 [Ah]
7. Max. Höjdvinkel: $\leq 8^\circ$
8. Max. svängradie: 1,20 [m]
9. Rullstolsvikt: 19,10 kg
10. Batterivikt: 3,30 kg

Notera! Vissa parametrar kan variera beroende på användarens vikt, vägförhållanden och batterianvändning.

- Säkerhetsklassificering: typ B
- Inträngningsskyddsnivå för motor: IP44
- Motoreffektnivå: 2x150[W]
- Rullstol kan inte användas i områden med brandfarlig gas blandad med luft, syre eller dikväveoxid.

3. Ikon beskrivning


Symbol	Menande
	Säkerhet Klassificering typ B
	Viktig! Läs bruksanvisningen
IP44	Skydd mot tillgång till farliga delar med ett verktyg, skydd mot främmande fasta ämnen med en diameter på 1 mm och större, skydd mot vattenstänk från alla håll
	Bräcklig
	Detta sida upp
	Skydda mot fukt och fukt

4. Montering och justering

- **Utfällning:** Ta ut rullstolen ur kartongen. Vik upp den tills du hör ett "klick"-ljud. Anslut strömkabeln till batteriet.
- **Fällning:** För att fälla ihop rullstolen, lås upp klämman på baksidan, ta tag i handtaget och tryck ned det. För extra säkerhet, för att förhindra att rullstolen fälls ut, använd den medföljande remmen.

Notera! Koppla bort strömkabeln från batteriet innan du fäller ut det.

- **Kontrollmodulens läge** : Justering bör göras sittande. Lossa monteringskruven och justera panelens position. Dra åt skruven.
- **Lutning av armstöd** : Tryck på knapparna på utsidan av rullstolen för att lyfta armstöden. För att sänka armstödet, dra ner dem tills du hör ett "klick"-ljud.
- **Montering av tippskydd** : Sätt in hjulen i monteringsöppningarna på rullstolens baksida. Fäst dem med dedikerade skruvar och dra åt med insexnyckel och tång.
- **Ta bort batteriet** : för att ta bort batteriet, lås upp spännet som sitter under och dra långsamt ut batteriet.

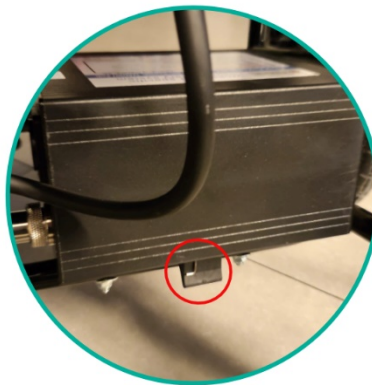




5. Drift



A. KONTROLLMODULENS FUNKTIONER



- **Joystick (A)** – används för att styra hastighet och riktning. Ju längre joysticken trycks bort från mitten, desto snabbare rör sig rullstolen. Den tappar hastighet automatiskt när joysticken släpps.
- **Slå på/av-knapp (B)**
- **Hastighetsindikator har 5 nivåer (C):** 1 – långsammast, 5 – snabbast.
- **Signalhornsknapp (D)** – tryck för att använda signalhornet.
- **Hastighetsjusteringsknappar (E)** – använd +/- för att öka eller minska hastigheten
- **Batterinivåindikator (F)**
- **Tystningsknapp (G)**
- **USB-port och modul med ficklampa (H)**

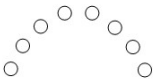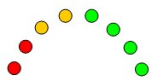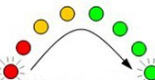


LED display	Status	Beskrivning
	Alla LED-lampor är släckta	Rullstolen är avstängd eller i viloläge.
	Alla LED-lampor är tända	Rullstolen är påslagen. Lampans färg visar batterinivån. Grön – fulladdad, röd – batteriet är slut.
	Blinkande rött LED- ljus	Batteriet börjar ta slut. Ladda så snabbt som möjligt.
	Lysdioder tänds i en sekvens från vänster till höger	Rullstolsbatteriet laddas. När rullstolen är nära att vara fulladdad saktar frekvensen av blinkningar ner. Alla gröna lampor tänds indikerar att batteriet är fulladdat.

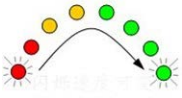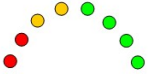	Lysdioder blinkar i en följd från vänster till höger	Rullstolen är i körläge. Färgen beror på batterinivån.
	Alla LED-lampor blinkar	Rullstolen är i manuellt (frihjulsläge). Stäng av kontrollmodulen och ändra läget med de dedikerade spakarna. Slå på modulen igen för att använda rullstolen i elektriskt läge.

B. MANUELL OCH ELEKTRISK LÄGESVÄXLING

För att använda rullstolen i manuellt läge, flytta ner vänster och höger motorspak som finns på baksidan. För att använda den i elektriskt läge, flytta spakarna uppåt.

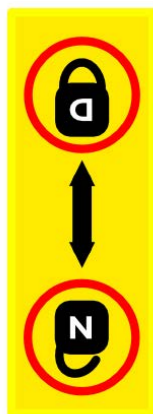

Electric mode

Manual mode

C. LADDARE

- Setet innehåller en laddare dedikerad till batteriet.
- Batteriets laddningstid är cirka 6 timmar.
- Anslut laddaren till laddningsporten i kontrollmodulen eller på batteriet:



- Anslut laddaren till strömförsörjningen.
- Kontrollera anslutningen.
- För att undvika risken för brand, modifiera eller koppla inte bort laddningskretsen medan du laddar batteriet.

D. BRUKSANVISNING

- Välj önskat körläge.

Notera! Byt inte körläge när du kör i höjdläge.

- Tryck på strömbrytaren för att kontrollera att bromsarna fungerar korrekt. Bromsarna fungerar korrekt (elektriskt läge) om du inte kan skjuta rullstolen. Kontakta annars säljaren.
- Luta fotstödet och sitt bekvämt på sätet. Sänk tillbaka fotstödet till horisontellt läge.

Notera! Använd inte fotstödet som stöd när du sätter dig ner eller reser dig upp från rullstolen. Detta kan få rullstolen att luta och falla.

- Sätt dig på rullstolen och slå på kontrollpanelen. Lamporna kommer att tändas. Joysticken ska vara i neutralläge.
- Var försiktig när du använder den för första gången. Kontrollera hastigheten och riktningen noggrant. Den elektromagnetiska bromsen lossas först efter att man trycker på joysticken (elektriskt läge). För att öka hastigheten trycker du joysticken längre bort från dess neutrala läge. För att sakta ner – gör tvärtom.
- Släpp joysticken för att stoppa rullstolen. Genom att trycka på strömknappen stoppas också rullstolen.
- Använd dedikerade knappar på kontrollpanelen för att justera rullstolens hastighet efter användarens fysiska tillstånd och vägförhållanden.
- Rullstol bör endast användas på plana ytor. Körning på leriga eller ojämna ytor kan orsaka skador på styrsystemet.

6. Tekniska data

Produktkod	FLASH-TIM
Total höjd	93 cm
Total bredd	62 cm
Total längd	90 cm
Sitthöjd från marken	46 cm med dyna: 54 cm
Ryggstödet höjd	41 cm
Sittdyna mått	45 x 45 x 8 cm

Batterivikt	3,30 kg
Maximal kapacitet	120 kg
Rullstol vikt	19,10 kg
Hjul	fram: solid, 8" baksida: solid, 12"

7. Rengöring och underhåll

- Det rekommenderas att regelbundet inspektera konstruktionen och dess delar (hjul, ramar, kablar, styrmodul, bromsar etc.).
- Alla använda eller skadade rullstolsdelar måste bytas ut (kontakta i så fall säljaren).

8. Batteriunderhåll och rengöring:

- 1) Kontrollera regelbundet den visade batterinivån. Om nivån är mycket låg, ladda den omedelbart för att undvika ett spänningsfall (vilket kan påverka batteriets livslängd).
- 2) Om rullstolen inte ska användas under en längre tid, ladda batteriet minst en gång i månaden.
- 3) Batteriet har en viss livslängd. Byt ut batteriet om det slits.
- 4) Batteriet ska hållas rent och borta från barn. Undvik att orsaka stötar eller skador på batteriet.
- 5) Ladda den regelbundet för att förlänga dess livslängd.
- 6) Använda batterier ska användas enligt lokala miljöbestämmelser.

9. Förvarings- och transportförhållanden

A. TRANSPORT

- Var försiktig under transport. Kasta, vänd eller utsätt inte produkten och dess förpackning.
- För rullstolsfällning, kontrollera „Montering och justering”.

B. LAGRING

Rullstolen ska förvaras i torrt och välventilerat utrymme. Undvik: hög temperatur och dess snabba förändringar, syror, alkalier och frätande kemikalier.

C. FÖRVARINGSVILLKOR

Temperatur : -25[°C] ~+55[°C]

Luftfuktighet: 30-75 %

10. Felsökning

- I händelse av ett fel kommer styrmodulen att indikera det med ett pip och en blinkande diod. Antalet pip och LED-blinkningar hjälper till att identifiera problemet.

Antal blixtar	Typ av problem	Orsak / möjligt lösning
1	Användarfel	Användaren överskred gränsen som ställts in av styrenheten. Rullstolen slår inte på.
		Släpp tillbaka joysticken till mittläget och försök igen.
2	Gränssnittsfel	Kontrollpanelens gränssnittsfel uppstår.
		Kontakta säljaren för att byta panelen.
3	Batteri/laddare fel	Laddaren eller batteriet kan ha skadats.
		Kontrollera om nätsladdarna är åtdragna.
4	Vänster motor fel	Kontrollera om nätsladdar som är anslutna till den vänstra motorn är åtdragna.
5	Höger motorfel	Kontrollera om nätkablar som är anslutna till höger motor är åtdragna.
6	Fel på vänster elektrisk broms	Kontrollera om nätsladdar som är anslutna till vänster broms är åtdragna. Leta efter skador eller anslutningsfel.
7	Fel på höger elektrisk broms	Kontrollera om nätsladdar som är anslutna till höger broms är åtdragna. Leta efter skador eller anslutningsfel.
8/9	Kontrollmodulfel	Kontrollera anslutningen. Kontakta säljaren.

11. Garantiinformation

- Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som finns på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas. Som ett användarvänligt företag

tillhandahåller vi endast testade produkter – vad gäller material, kvalitet och funktionalitet. Om du har några frågor angående serviceprocedurer, vänligen kontakta oss.

- Garantin täcker inte:
 - bärbara delar: klädsel, däck, armstöd, batteri
 - skador till följd av: självreparationer, förändringar i produktkonstruktion, tapning, transport, olämplig användning, underlåtenhet att följa instruktioner, naturkatastrofer (brand, jordbävning, översvämning)



Wen'an County Wantong Medical Instrument Co., Ltd.

Nan Liu Zhai Village, Wen'an County, Langfang City, Hebei Province, China



SUNGO Cert GmbH

Harffstr. 47, 40591 Düsseldorf, Germany



Timago International Group

Timago International Group Ossowski Sp.k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

E.: info@timago.com



04/2025(I)