

BRUGERVEJLEDNING

Sengegelænder


Produktkode: GripTim



1. Egenskaber

Sengegelænderet er lavet af holdbart, pulverlakeret stål. Det har højdejusterbare ben, skumhåndtag, rem til fastgørelse på sengen og en lille lomme.

Sættet indeholder: midterrammekomponenter (2 stk), bundramme med rem, ben med dupper (2 stk), taske, midterrammeforbinder, låseclips (2 stk), øvre ramme med håndtag.

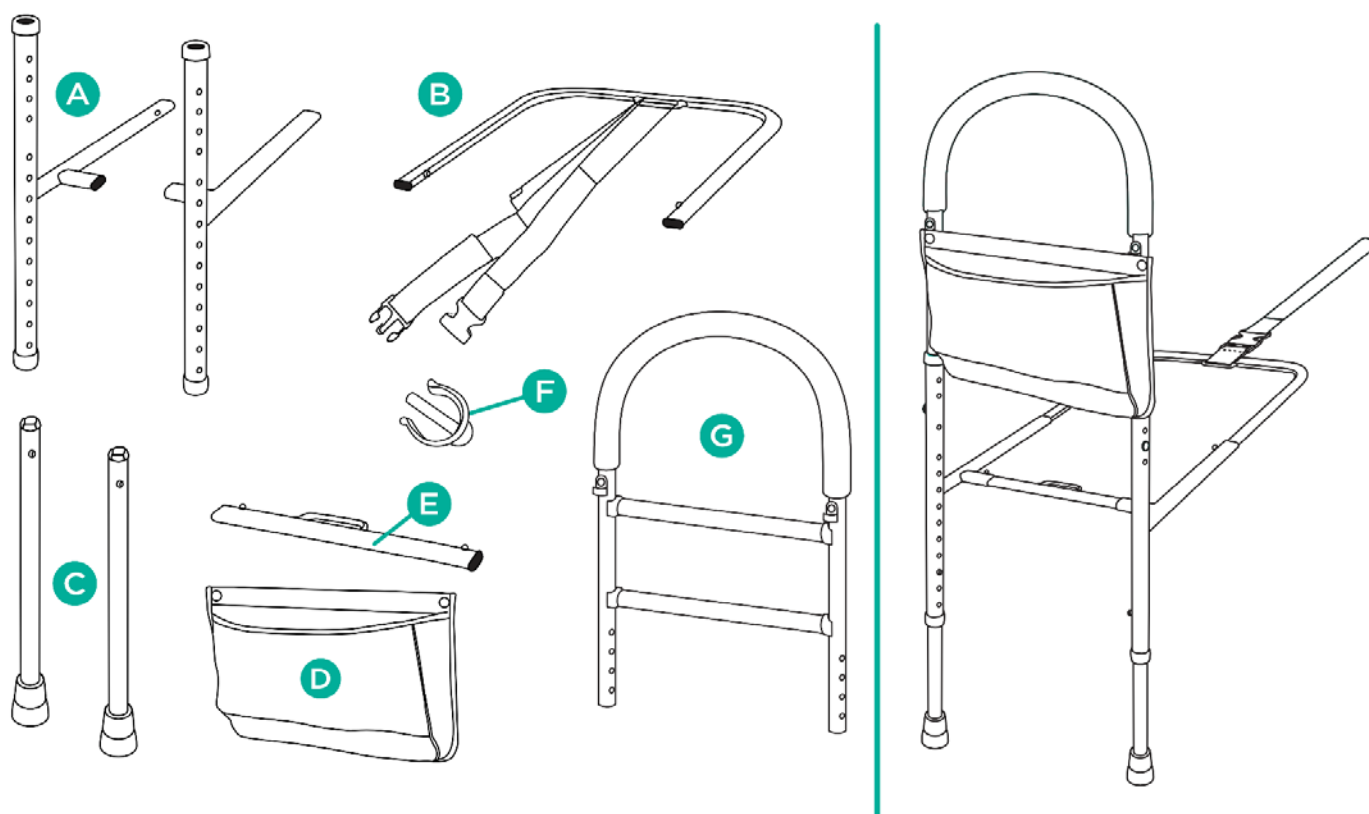

Elementer af gelænderet:

- A. Midterrammekomponenter med højdejustering
- B. Bundramme med fastgørelsesrem
- C. Ben med gummidupper
- D. Taske
- E. Midterrammeforbinder
- F. Låsepind til højdejustering af håndtag
- G. Øvre ramme med skumhåndtag

2. Anvendelse

Sengegelænderet er designet til at give støtte ved oprejsning eller skift fra liggende til siddende stilling i sengen. Gelænderet anbefales til personer med nedsat mobilitet, som har svært ved at udføre daglige aktiviteter uden hjælp. Sengegelænderet anbefales til brug både i medicinske faciliteter og i hjemmet.

3. Montering


Trin 1. Forbind midterrammekomponenterne (A) med midterrammeforbinderen (E) ved hjælp af låsepinde.

Trin 2. Forbind bundrammen (B) med midterrammen (A) ved hjælp af låsepinde.

Trin 3. Monter benene (C) i bundåbningerne på midterrammekomponenterne (A) med låsepinde. Begge ben skal indstilles til samme højde.

Trin 4. Monter den øvre ramme (G) i topåbningerne på midterrammen (A) og fastgør dem med låseclips (F) på begge sider. Sørg for, at de er i samme højde.

Trin 5. Fastgør gelænderet til sengerammen og spænd remmen (billede 1).

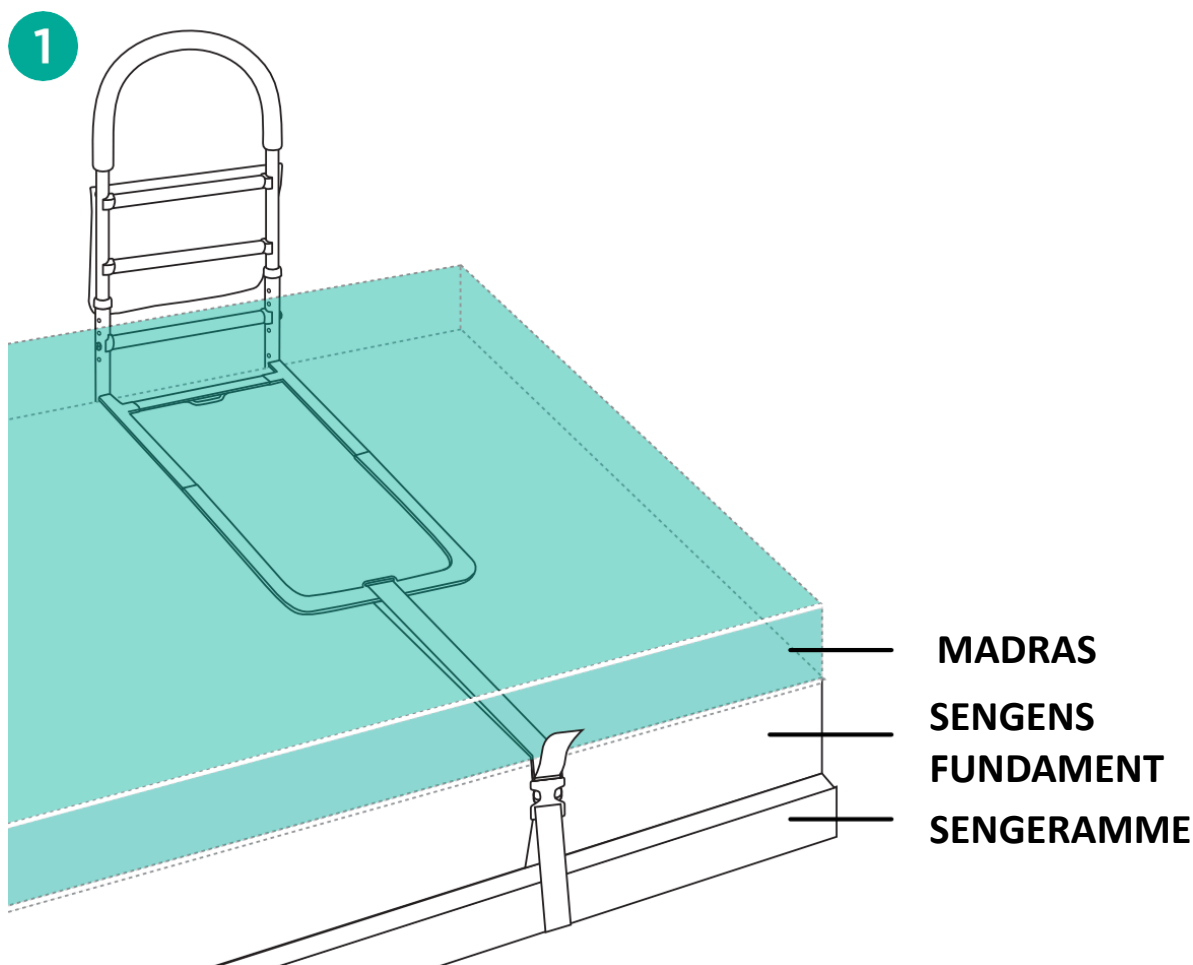

Trin 6. Sørg for, at begge ben rører gulvet. Hvis ikke, justér højden på benene ved hjælp af låsepinde.

Trin 7. Monter tasken under håndtaget på den øvre ramme (G) med de fastgjorte clips på tasken.

Sengegelænderet er klar til brug.

HØJDEJUSTERING AF HÅNDTAG OG BEN

- For at justere håndtaget, fjern låseclipsene på begge sider og juster højden efter behov. Fastgør derefter med clipsene. Håndtaget skal være i samme højde på begge sider.
- For at justere benene, tryk på låsepindene placeret på benene og vælg den passende højde. Begge ben skal være i samme højde.

4. Tekniske data

Samlet højdejustering	89,5-112 cm
Samlet bredde	37 cm
Samlet dybde	74 cm
Højdejustering af håndtag*	52-60 cm
Remlængde	192 cm
Bundrammens højde fra gulvet	30-55 cm
Maks. belastningskapacitet	136 kg

* målt fra bundramme til håndtag

5. Bemærkninger

Timago International Group påtager sig intet ansvar for forkert brug af produktet, manglende overholdelse af sikkerhedsregler eller misbrug.

6. Vedligeholdelse

Rengør rammen og tasken regelmæssigt med en fugtig klud uden brug af kemikalier. Tør grundigt. Vanskelige pletter på tasken kan fjernes med en svamp.

7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet må ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.

8. Garantiinformation

Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er dækket af en garanti, hvis betingelser er beskrevet i garantikortet, som findes på vores hjemmeside. Kontakt

venligst forhandleren, hvor du har købt produktet. Husk at opbevare købsbeviset (kvittering eller faktura) for at kunne gøre brug af garantien.

9. Mærkater

	Referencenummer		Producent
	Batchnummer		UDI-kode
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs venligst brugsanvisningen
	Producenten har kontrolleret overensstemmelsen med væsentlige krav til medicinsk udstyr.		

Vores komplette sortiment af produkter fås hos vores distributører. Læs mere på: **www.timago.com**. Tak fordi du valgte Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



07/2025(I)