

BRUKSANVISNING

Rullator i aluminium med fyra hjul och knästöd

Produktkod: Knee Walker



1. Egenskaper

Fyrahjulig rollator med knästöd är tillverkad av en aluminiumram som är belagd med metallicfärg. Rollatorn är utrustad med en avtagbar väska, fotstöd och knästöd med justerbar höjd. Den har ett höjjusterbart styre med anatomiska handtag, bromsar för bakhjulen och hjul med smalt tvärsnitt på 8" i diameter.

Setet innehåller: fällbar ram, knästöd, universellt fotstöd, reglage till fotstöd, väska, 3 korta låsvred och 1 långt låsvred.

Delar av rollatorn

- A. Handbromsar
- B. Styre
- C. Knästöd
- D. Låsvred
- E. Bromskabel
- F. Längdjustering
- G. Fotstöd
- H. Vred för fotstöd
- I. Säkerhetsspänne
- J. Väska med reflexband




2. Användning

Rullatorn är avsedd för patienter med nedsatt rörlighet som behöver stabilt stöd. Den rekommenderas också för äldre och personer med skador i nedre extremiteterna som hjälpmedel för att hålla balansen, förbättra rörelsekomforten och minska risken för fall. Användning av rullatorn har en positiv inverkan på återgången till aktivitet efter skador. Den garanterar bättre stabilisering, stöd och säkerhet vid förflyttning.

OBS! Rullatorn bör inte användas av personer med problem eller skador i knäleden på grund av det höga trycket som uppstår vid användning.

3. Montering




Utfällning och ihopfällning av rollatorn

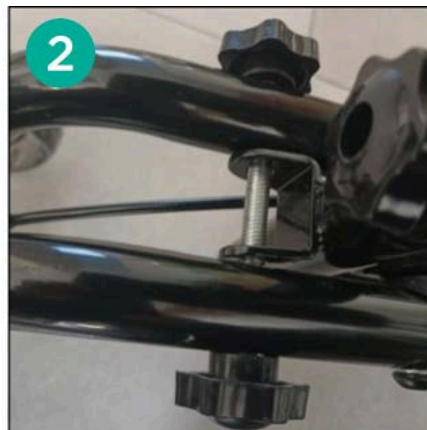

- Fäll ut rollatorn och fäst del A i del B tills du hör ett klickljud från låssprinten. Säkra ramen med låsvreden.

OBS! Avståndet mellan del A och B är justerbart. För att justera, skruva loss låsvredet, ta bort det och tryck in låssprintarna på båda sidorna. Justera ramen till lämplig längd och säkra sedan med vredet.

- Säkra bakhjulen genom att sätta det långa låsvredet i öppningen på baksidan av del B. Vredet ska passera genom 4 öppningar i del B (bild 2). Dra åt vredet.
- Skjut fram stången tills styrets bas är helt ansluten till rollatorns bas (horisontell position). Spänn säkerhetsspännet (se bilder 3–5).

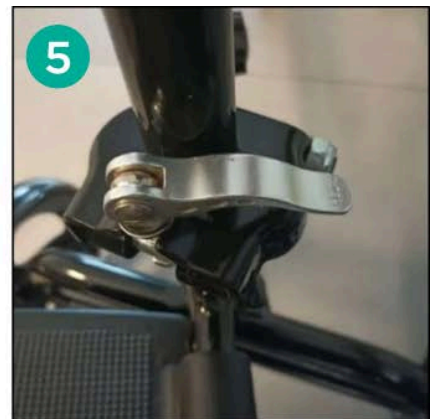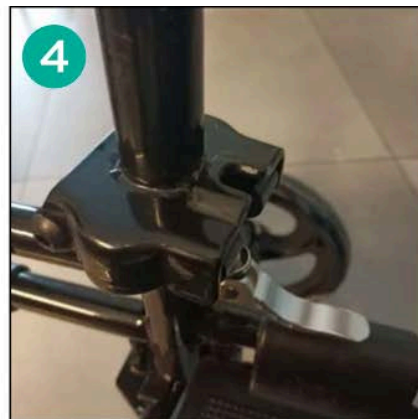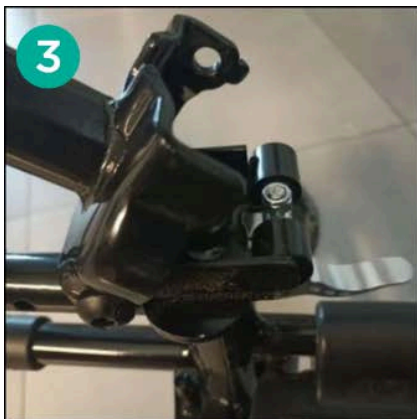

- Säkra styret genom att dra upp det till önskad längd. För in låsskruven i öppningen framtill och dra åt med vredet på andra sidan.
- Montera knästödet i öppningen i del B. Välj lämplig höjd och säkra det med låsvredet.
- Säkra fotstödet med vredet som ingår i setet.



- Skjut in väskan i de övre öppningarna på den speciella plattan framtill på stängan. Tryck väskan nedåt för att låsa fast den (bild 6). För extra säkerhet, fäst kardborrebandet på baksidan av väskan runt ramen.

OBS! En extra insats av hårt material finns i väskans botten. Använd kardborrebanden för att säkra den.

- För att fälla ihop rullatorn, upprepa ovanstående steg i omvänd ordning. Kom ihåg att: ta bort alla låsskruvar, lossa del A från del B, ta bort knästödet och fäll styret till horisontell position.

OBS! Vid hopfällning av styret, lossa säkerhetsspännet och dra åt sidan för att separera stängens bas från ramen.

BROMSAR

- För att stanna rullatorn, tryck på båda bromshandtagen samtidigt.

JUSTERING AV STYRETS HÖJD

- För att justera handtagens höjd, skruva loss låsvreden som sitter på utsidan av ramen, välj lämplig höjd och dra åt låsvreden igen.

4. Tekniska data

Total bredd	44 cm
Knästöd dimensions	35 x 18 cm
Total längd	84-89 cm
Sitsens höjd från marken	45,5-58 cm
Justerbar styrehöjd	89-119 cm
Vikt	9,6 kg
Maxkapacitet	136 kg

Ramfärg

svart

5. Anmärkningar

Timago International Group ansvarar inte för felaktig användning av rullatorn, bristande efterlevnad av säkerhetsföreskrifter eller missbruk.

6. Underhåll

Rengöring

- Rengör ramen med en fuktig trasa och torka noggrant.
- Använd inte starka polermedel eftersom de kan skada skyddsskiktet.
- Rengör regelbundet smuts från rullatorns rörliga delar (gångjärn, klämmande skruvar, lås).









7. Förvarings- och transportförhållanden

Enheten får inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av garanti. Garantivillkoren finns i garantikortet på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål ska inköpsbeviset (kvitto eller faktura) sparas.

9. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	Partinummer		UDI-kod
	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Obs!		Vänligen läs instruktionen
	Tillverkaren har kontrollerat att kraven för medicintekniska produkter uppfylls.		

Vårt kompletta sortiment finns tillgängligt via våra distributörer. Läs mer på:
www.timago.com. Tack för att du valt Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



06/2025(I)