

# ANVÄNDARMANUAL

## Aluminium 4-hjulig rollator

Produktkod: LORENZA




### 1. Egenskaper

Fyrhjulig rollator är tillverkad av högkvalitativt aluminium. Den har solida främre 10" och bakre 7,5" diameter hjul, höjdjusterbara handtag färdiga med anatomiska grepp, bromsar med parkeringsfunktion, säte med ryggstöd och väska. Strukturen är baserad på en korsningsram och ett ovalt tvärsnitt av rör, tack vare vilket motståndet mot axiellt tryck ökas avsevärt. Den dolda bromsvajern ger ett estetiskt tilltalande utseende.

**Setet innehåller** : ram med sits, fram- och bakhjul, ryggstöd, shoppingväska.

Rollatorns egenskaper :

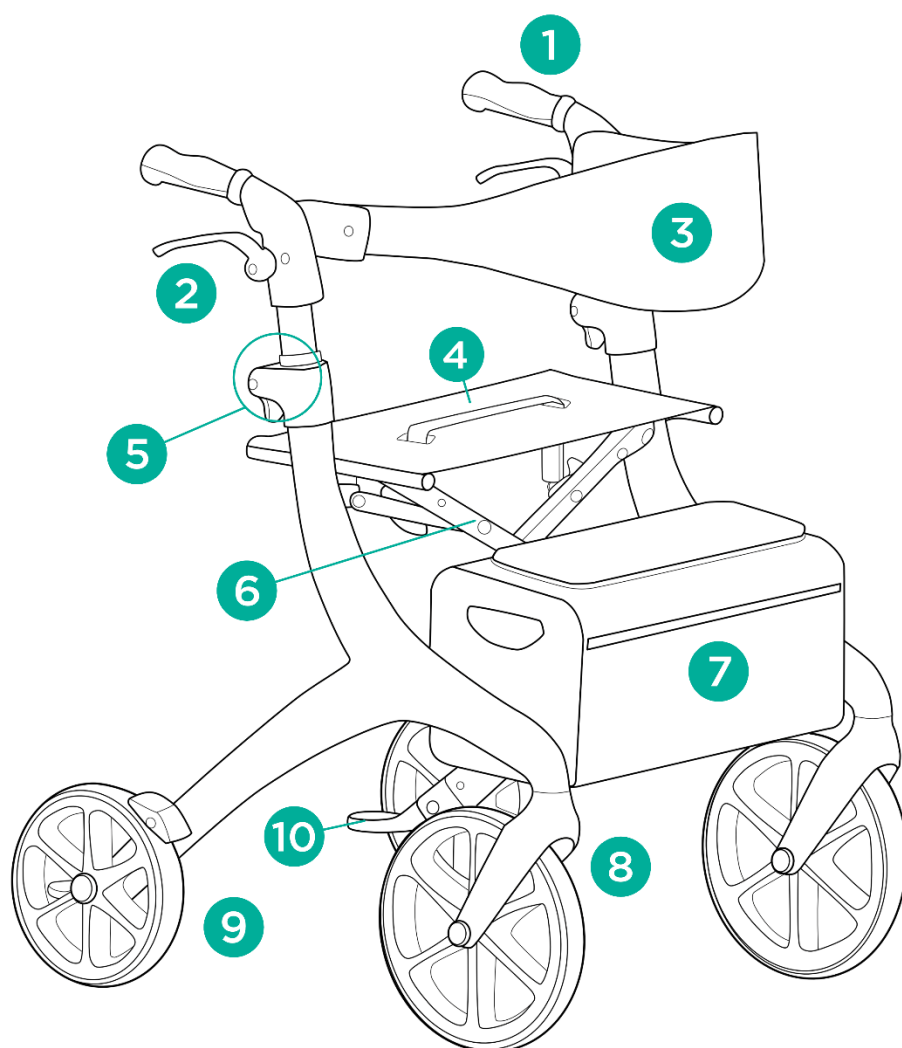

1. Handtag
2. Broms med parkeringshandtag
3. Ryggstöd
4. Plats
5. Lås för höjdjustering
6. Tvärstång
7. Väska
8. Främre 10" hjul
9. Bakre 7,5" hjul
10. Stödpedal/kantklättrare

### 2. Ansökan

Rollatorn är designad för patienter med nedsatt rörlighet som behöver stabilt stöd och hjälp under gång. Det rekommenderas även till äldre som ett hjälpmedel för att hålla balansen för att förbättra gångkomforten och säkerställa säkerheten

mot fall. Användningen av rollatorn har en positiv effekt på återgången till aktivitet hos personer med förflyttning och lutning för att upprätthålla positionsproblem. Det garanterar bättre stabilisering, stöd och säkerhet när du går.

### **3. Montering**

#### **Utveckling**

- För att fälla ut rollatorn, ta tag i båda handtagen och dra dem utåt. Tryck försiktigt på sätet på båda sidor för att fälla ut rollatorn helt (karakteristiskt "klick"-ljud).

#### **Hopfällbar**

- För att fälla ihop rollatorn, dra upp sätet.
- Se till att rollatorn är korrekt ihopfälld.

#### **Handtags höjdjustering**

För att justera höjden på handtaget:

- Tryck ner bromsen för att aktivera parkeringsbromsen och låsa rullatorn.
- Lyft upp justeringsklämman.
- Justera höjden på handtaget.
- Dra åt klämman för att låsa den justerade höjden på handtagen. Dra handtaget upp och ner flera gånger för att kontrollera att det är korrekt låst.
- Justera höjden på det andra handtaget på liknande sätt.

**NOTERA!** Båda handtagen ska vara inställda på samma höjd.

#### **Bromsfunktion**

- För att stoppa rollatorn, dra upp bromshandtaget och håll sedan.
- När du inte är i rörelse eller använder sätet, lås parkeringsbromsen med parkeringsklämman genom att dra ned bromshandtaget.
- För att lossa parkeringsbromsen, dra handtaget uppåt s .

#### **Ta bort och fästa ryggstöd och väska**

Väska och ryggstöd kan demonteras.

- För att ta bort ryggstödet, tryck på knappen som är placerad på den övre, inre delen av ramen och dra upp ryggstödet.
- För att ta bort påsen, dra upp den från monteringsöppningarna på den nedre, inre delen av ramen.
- För att fästa väska och ryggstöd, upprepa stegen bakåt.

## Stödpedal

- Stödpedalen används för att övervinna hinder, som trottoarkanter. Tryck ner pedalen med foten för att lyfta upp rollatorn.

## 4. Tekniska data

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Mått efter vikning          | 70 x 15 x 86,5 cm |
| Total bredd efter utvikning | 58 cm             |
| Total längd                 | 87 cm             |
| Sittbredd                   | 45 cm             |
| Sitthöjd från marken        | 55 cm             |
| Handtagshöjjustering        | 86,5-96,5 cm      |
| Rollatorvikt                | 7,50 kg           |
| Maximal kapacitet           | 136 kg            |
| Ramfärg                     | mörkblå           |

## 5. Anteckningar

**Timago International Group tar inte ansvar för felaktig användning av rollatorn, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter och felaktig användning.**

## 6. Underhåll

### Rengöring

- Rengör ramen med en fuktig trasa och torka ordentligt.
- Använd inte starka polermedel på grund av risken för skador på skyddande beläggningar.
- Rengör smutsen från rörliga delar av rollatorn regelbundet (gångjärn, klämskruvar, lås).

## 7. Förvarings och transportförhållanden

Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

## 8. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som finns på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas.

## 9. Etiketter

|                                                                                     |                                                                                        |                                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | Referensnummer                                                                         |  | Tillverkare              |
|    | LOT -nummer                                                                            |  | Tillverkning datum       |
|    | Serienummer                                                                            |  | Medicinsk apparat        |
|    | Notera                                                                                 |  | Behaga läs instruktionen |
|  | Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse med väsentliga medicinska utrustningskrav. |                                                                                   |                          |

Vårt kompletta produktsortiment finns tillgängligt från våra distributörer.

Läs mer på: **[www.timago.com](http://www.timago.com)**.

Tack för att du valde Timago!



**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



03/2025(I)