

BRUKSANVISNING

Geriatrisk uppresningsfåtölj

Produktkod: RELAX



1. Egenskaper

Den geriatriska uppresningsfåtöljen RELAX ger äldre personer som bor i eget hem möjlighet till bekväm vila. Fåtöljen är utrustad med två oberoende motorer som ger maximal användarkomfort genom många inställningsmöjligheter. Med handkontrollen kan fåtöljen anpassas individuellt efter användarens behov. Tack vare uppresningsfunktionen lutar fåtöljen framåt, vilket gör det lättare för en äldre person att både resa sig från och sätta sig i fåtöljen.

Satsen innehåller: fåtölj med basram, ryggstöd, nätkabel med nätadapter, handkontroll.



2. Användningsområde


Den geriatriska fåtöljen är avsedd för personer med:

- svårigheter att förflytta sig självständigt,
- nedsatt och begränsad rörelseförmåga,
- allmän svaghet till följd av hög ålder.

3. Montering, demontering och användning

FÖRE MONTERING

- Se till att fåtöljen står på ett plant underlag.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan fåtöljen, väggen och andra föremål i rummet.
- Ta bort fästena som håller fast fåtöljens kablar vid basramen.

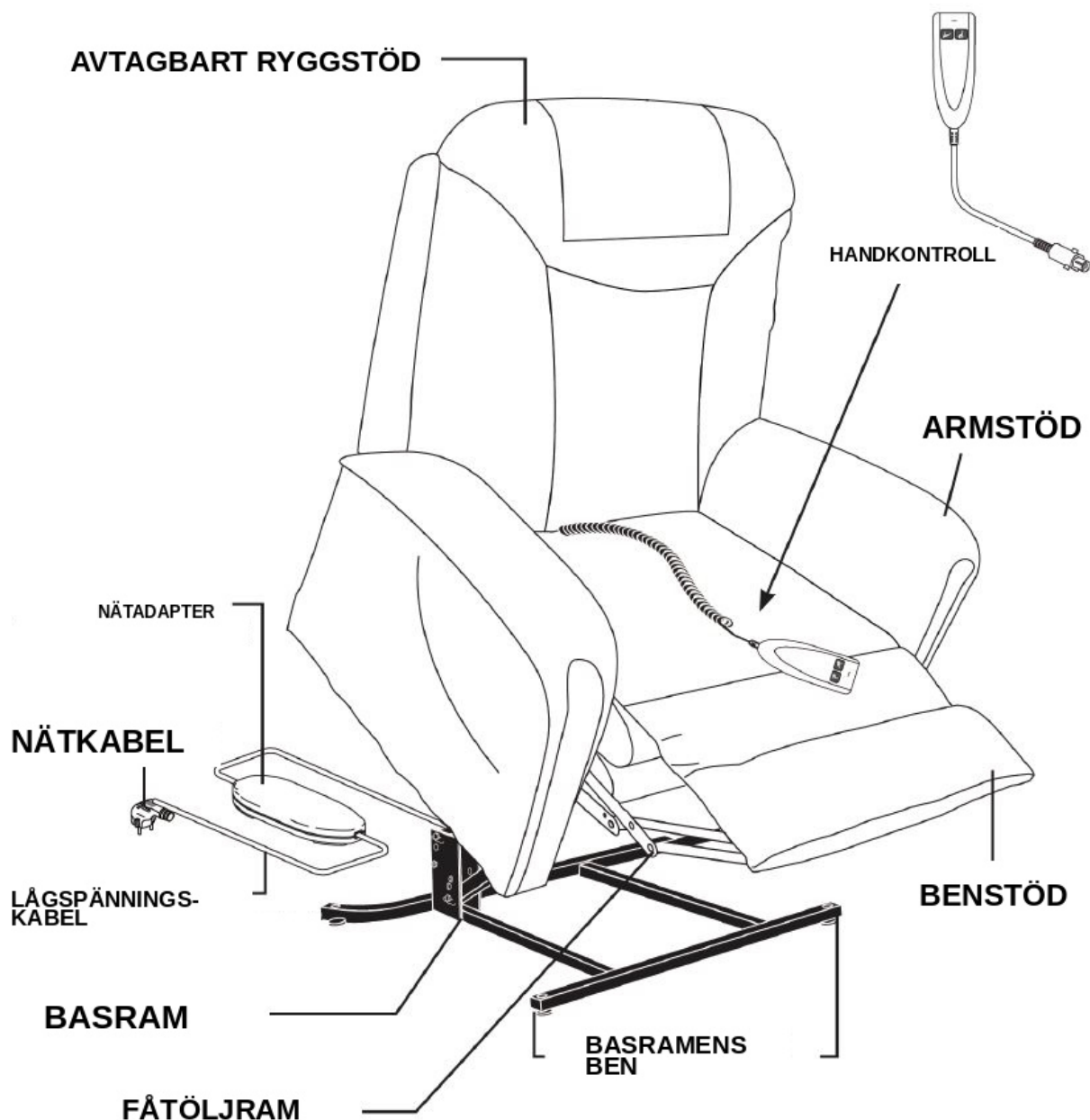

MONTERING

- Fåtöljen levereras färdigmonterad, med undantag för det avtagbara ryggstödet.
- Montera ryggstödet på sitsen med hjälp av de två monteringsckenorna på sitsens båda sidor.
- Tryck ned ryggstödet tills båda monteringsckenorna klickar på plats.
- Kontrollera att ryggstödet sitter säkert genom att dra det lätt uppåt. Om ryggstödet sitter löst, upprepa monteringsstegen ovan.

- Fäst de två tygöverdragen som förbinder ryggstödet med sitsen med de främre och bakre kardborrebanden.
- Anslut nätkabeln till uttaget på basramen och lås sedan uttaget.
- Anslut handkontrollens kabel till uttaget i fåtöljens sidoficka och lås sedan uttaget.

DEMONTERING

- Lås upp uttagens spärrar och koppla ur både handkontrollens och nätkabelns kontakter.
- Lossa båda tygöverdragen (de främre och bakre kardborrebanden).
- Böj försiktigt låsflikarna på båda monteringskenorna med ett lämpligt verktyg och skjut ut ryggstödet.

ANVÄNDNING AV HANDKONTROLLEN

Knapp A

Sänker ryggstödet

Knapp B


Höjer ryggstödet

Knapp C

Uppresning – hela fåtöljen höjs och lutar lätt framåt för att underlätta uppresning. Om benstödet är uppfällt sänks det först och därefter höjs fåtöljen.

Knapp D


Sänkning – hela fåtöljen sänks. Efter neutralläget höjs benstödet om knappen hålls in.

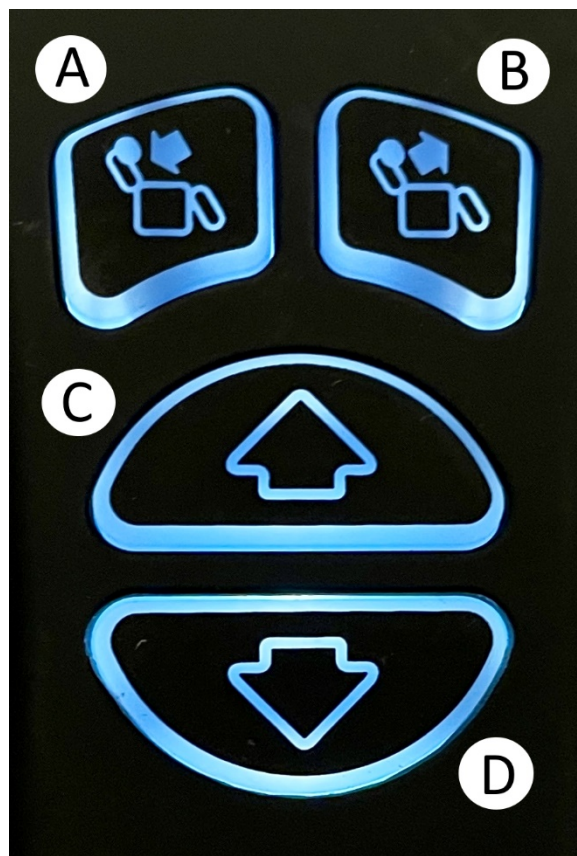

TRANSPORT AV FÅTÖLJEN

Fåtöljen är utrustad med två bakhjul för transport (se figuren nedan).

För att flytta fåtöljen, luta ryggstödet något bakåt så att fåtöljen vilar på hjulen. Flytta därefter fåtöljen.

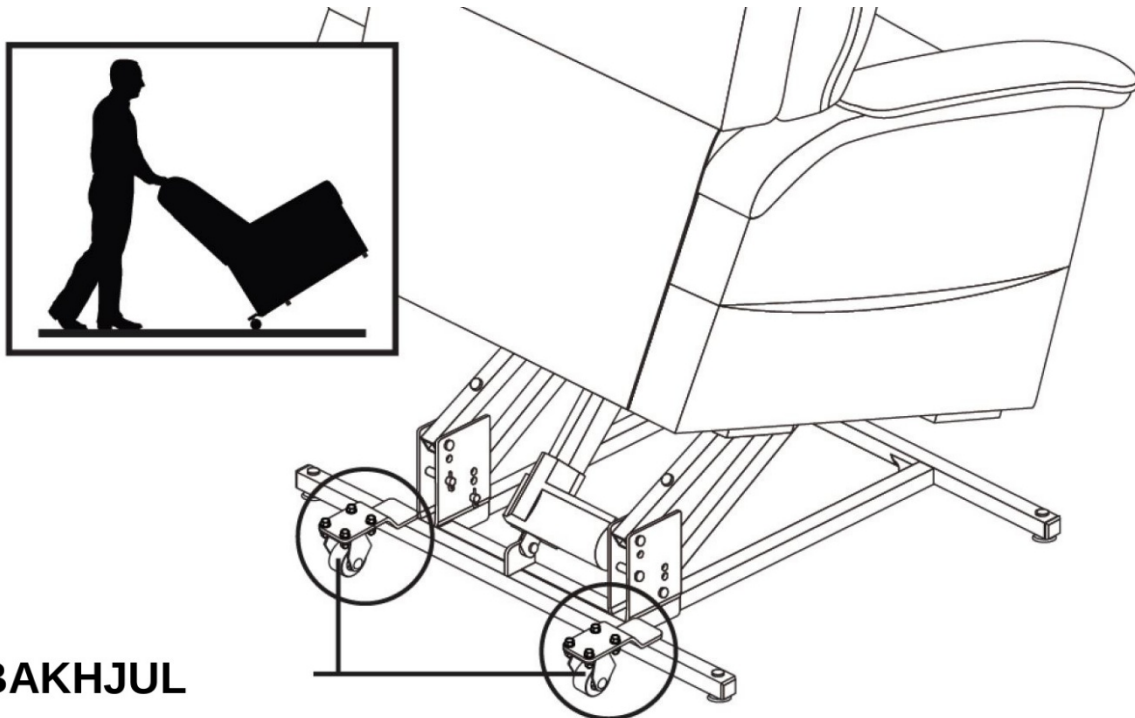

BAKHJUL

4. Tekniska data

Total längd (sittläge)	85 cm
Total höjd (sittläge)	109 cm
Sittdjup	43 cm
Ryggstödet's höjd	76 cm
Sitthöjd (sittläge)	51,5 cm
Total bredd	80 cm
Total höjd	55 cm
Armstödet's höjd	12,5 cm
Total längd (bakåtlutat läge)	159 cm
Total höjd (bakåtlutat läge)	89 cm
Total längd (uppresningsläge)	84 cm
Total höjd (uppresningsläge)	129 cm
Ryggstödet's lutningsvinkel	141°
Benstödet's lyftvinkel	89°
Fåtöljens lyftvinkel	17°

Vikt	43 kg
Maximal belastning	130 kg
Drivsystem	dubbelt
Klädsselfärg	Mocka, sand

5. Anmärkningar och kommentarer

Timago International Group ansvarar inte för felaktig användning av produkten, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna eller missbruk.

- Fåtöljen är avsedd för inomhusbruk.
- Det är förbjudet för fler än en person att sitta i fåtöljen.
- Sitt inte på fåtöljens ryggstöd, armstöd eller benstöd.
- Håll händer och fötter borta från basramens och fåtöljramens rörliga delar.

6. Underhåll

Rengör klädseln med en fuktig trasa och torka sedan noggrant. Använd inte starka desinfektionsmedel eftersom de kan skada tyget. Avlägsna smuts från basramens och fåtöljramens rörliga delar.

7. Förvarings- och transportförhållanden

Produkten får inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti vars villkor beskrivs i garantikortet på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att inköpsbeviset (kvitto eller faktura) ska sparas för garantiärenden.

9. Märkning

	Referensnummer		Tillverkare
	LOT-nummer		UDI-kod
	Serienummer		Medicinteknisk produkt

	Observera		Läs bruksanvisningen
	Tillverkaren har kontrollerat överensstämmelsen med de väsentliga kraven för medicintekniska produkter.		

Vårt fullständiga produktsortiment finns hos våra distributörer. Läs mer på: **www.timago.com**. Tack för att du valde Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

E.: info@timago.com



07/2026(I)