

BRUGERVEJLEDNING

Elektrisk kørestol

Produktkode: SMART-TIM



1. Sikkerhedsoplysninger

- Læs manualen før første brug.
- Brug ikke kørestolen, før den er helt samlet.
- Brug af kørestolen af personer, der ikke er i stand til at betjene den selvstændigt, anbefales ikke.
- Maksimal bæreevne må ikke overstige 115 kg.
- Kørestolen må kun bruges af én person ad gangen.
- Det anbefales at holde fødderne på fodstøtten og underarmene på armlænene, når du kører.
- Kontroller altid batteriniveauet på kontrolpanelet før brug.
- Denne elektriske kørestol bør kun bruges på en flad overflade eller i lave højder. Den bør ikke køres på en overflade, der hælder i en vinkel på mere end 6 grader.
- Kør ikke kørestolen med maksimal hastighed, når du kører op eller ned ad bakke.
- Brug ikke kørestolen på bløde og glatte overflader som mudder, sand osv.
- Kør ikke kørestolen sidelæns på højt hævede områder.
- Læg ikke ekstra belastning, såsom en trailer osv. på kørestolen.
- Reparer eller modificer ikke kørestolens konstruktion på egen hånd. Brug kun originale reservedele leveret af producenten.
- Stå ikke op eller sæt dig ned på kørestolen, når kontrolmodulet er tændt.
- Brug ikke kørestolen uden anti-tip hjul.
- Når friløbstilstanden (manuel) er aktiveret, må du ikke stige af eller på kørestolen uden hjælp.
- Læn dig ikke fremad for at få fat i genstande, der ligger foran, på siden eller bagved kørestolen. Stå ikke på fodstøtten. Det kan resultere i, at kørestolen vælter.
- Undgå hurtige retningsændringer under kørsel i højder.
- Sæt altid farten ned, mens du kører ned ad bakke eller svinger.
- Kontroller før brug, om hjulene er korrekt monteret.
- Foretag ikke pludselige bevægelser, mens du bruger joysticket.
- Ved opbevaring skal du beskytte kørestolen mod regn og ugunstige vejrforhold.

- Før du tænder for kørestolen, skal du sikre dig, at håndtagene er indstillet til elektrisk tilstand.
- Undgå områder med vandrette mellemrum.
- Hvis kørestolen ikke skal bruges i længere tid – fjern batteriet.
- Brug ikke kørestolen på vejen. Det kan resultere i en bilulykke.
- Opbevar ikke kørestolen på steder med høje temperaturer og luftfugtighed.

2. Produktbeskrivelse og anvendelse

Elektrisk kørestol er designet til mennesker, der har problemer med mobilitet, og hjælper handicappede patienter med deres daglige opgaver. Den kan erstatte en almindelig kørestol.

Elektrisk kørestol er velegnet til patienter med:

- handicap, som har problemer med uassisteret bevægelse,
- dysfunktioner og nedsat bevægelighed,
- hjerte- og karsygdomme,
- svækkelse af kroppen på grund af høj alder.

A. KØRESTOLENS ELEMENTER



1. Håndtag
2. Ryglæn
3. Sæde
4. Armlæn
5. Kontrolmodul
6. Fodstøtte
7. Baghjul 8"
8. Forhjul 6"
9. Montering til styremodul
10. Sikkerhedssele
11. Armlæn foldeknop
12. Batteriholderskinner



13. Lomme til små varer

14. Motorer og
betjeningsgreb

15. Støddæmpere
foran og bagpå

16. Controller boks

17. Anti-tip hjul

18. Foldeklemme

Kørestol efter



B. PRODUKT KARAKTERISTIKA

- Aluminium, folderamme
- Solide 8" og forreste drejelige 6" hjul
- Kontrolmodul med LCD-display
- Sikre og pålidelige elektromagnetiske bremses
- Fuldt lukket, vedligeholdelsesfrit batteri med håndtag
- Børsteløse motorer
- Sikkerhedssele med låsesystem og anti-tip hjul
- Flip-up armlæn og fodstøtte
- Støddæmpere foran og bagpå
- Lomme til småting placeret bagpå
- Reflekterende klistermærker medfølger
- To driftsformer: elektrisk og manuel

C. TEKNISKE PARAMETRE

1. Produkttype: til indendørs og udendørs brug
2. Maksimal hastighed: ≤ 6 [km/t]
3. Maksimal kapacitet: 115 [kg]
4. Bremselængde på vandret overflade: ≤ 1 [m]

5. Maks. rækkevidde: 18 [km]
6. Batteri: lithium, 24 [V] x 12 [Ah]
7. Maks. Højdevinkel: $\leq 6^\circ$
8. Maks. venderadius: 0,90 [m]
9. Kørestolsvægt: 14,70 kg
10. Batterivægt: 2,30 kg

Note! Nogle parametre kan variere afhængigt af brugerens vægt, vejforhold og batteriforbrug.

- Sikkerhedsklassificering: type B
- Indtrængningsbeskyttelsesniveau for motor: IP54
- Motoreffektniveau: 2x150[W]
- Kørestolen kan ikke bruges i områder med brændbar gas blandet med luft, ilt eller lattergas.

3. Ikon beskrivelse


Symbol	Mening
	Sikkerhedsklassificering type B
	Vigtig! Læs brugermanualen
IP54	Beskyttelse mod begrænset støvindtrængning og vandspray fra enhver retning.
	Skrøbelig
	Denne side op
	Beskyt mod fugt og fugt

4. Montering og justering

- **Udfoldning:** Tag kørestolen ud af kassen. Fold den ud, indtil du hører en "klik"-lyd. Monter batteriet på skinnerne under sædet fra forsiden af kørestolen. Skub batteriet længere for at sikre, at det er tilsluttet strømkablet. Monter kontrolmodulet og tilslut det til modulets strømkabel. Tænd for strømmen ved at trykke på knappen placeret på batteriet ved siden af et håndtag.
- **Sammenfoldning:** Kørestolen foldes sammen ved at låse klemmen, der er placeret på bagsiden, op, tage fat i håndtaget og skubbe det ned.

Note! Fjern batteriet, før en kørestol foldes sammen.

- **Justering af kontrolmodul:** Justering skal foretages, mens du sidder. Løsn sikkerhedsspændet og løsn monteringskruen, juster modulets position eller længde. Spænd skruen og spændet bagefter.
- **Armlæn vipning:** Tryk på knapperne placeret på ydersiden af kørestolen for at løfte armlænen. For at sænke armlænet skal du trække dem ned, indtil du hører en "klik"-lyd.
- **Anti-tip hjul samling:** Sæt hjulene ind i monteringsåbningerne placeret bag på kørestolen. Træk i blokeringskruen og skub hjulene, indtil du hører en kliklyd.

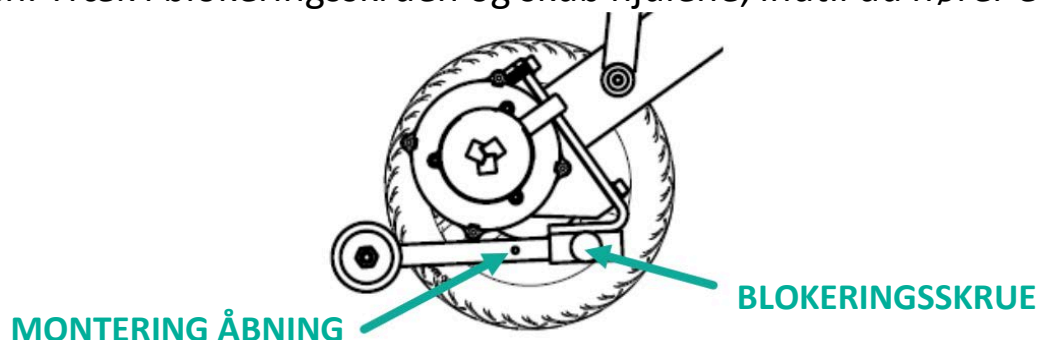


- **Fjernelse af batteriet:** For at fjerne batteriet skal du langsomt trække batteriet ud forfra ved håndtaget.

Note! Før du fjerner batteriet, skal du sørge for, at tænd/sluk-knappen på batteriet er slukket.

5. Operation

A. STYREMODULENS FUNKTIONER

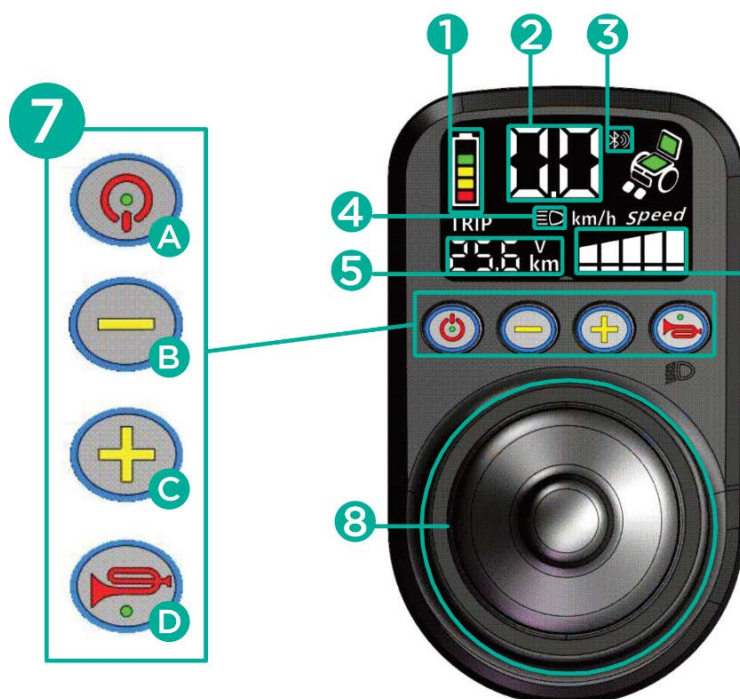

1. Batteriniveau
2. Visning af den aktuelle hastighed
3. Bluetooth-forbindelse
4. Lommelygte tænd/sluk
5. Kørselsafstand
6. Hastighedsniveauer
7. Betjeningsknapper
 - A. Tænd/sluk
 - B. Hastighedsniveau ned (tryk)
Advarselsfunktion (hold)
 - C. Hastighed op (tryk)
Stemmeassistent til/fra (hold)
 - D. Lys tænd/sluk (tryk på)
horn (hold)
8. Joystick

- **Joystick (8)** – bruges til at styre hastighed og retning. Jo længere joysticket skubbes væk fra midten, jo hurtigere vil kørestolen bevæge sig. Den vil automatisk miste hastigheden, når joysticket slippes.
- **Tænd/sluk-knap (7 A)**
- **Hastighedsjusteringsknapper (7 B/C, tryk)** - tryk på +/- for at øge eller mindske hastigheden.
- **Hastighedsniveauindikator (6):** 1 – langsomst, 5 – hurtigst.
- **Hornknap (7 D, hold)** – hold knappen nede for at bruge hornet.
- **Lommelygte (7 D, tryk)** – tryk på knappen for at tænde/slukke lommelygten placeret under kontrolmodulets panel.
- **Batteriniveauindikator (1)**
- **Stemmeassistent slukket/tændt (7 C, hold)** – hold knappen nede i mere end 5 sekunder for at tænde/slukke for stemmeassistenten.
- **Advarselsfunktion (7 B, hold)** – hold knappen nede for at aktivere advarselsfunktionen. Tryk på en hvilken som helst anden knap for at slukke den.

B. MANUEL OG ELEKTRISK TILSTANDSOMSKIFTE

For at bruge kørestolen i elektrisk tilstand skal du flytte venstre og højre motorhåndtag, der er placeret bagerst, ned. For at bruge den i manuel tilstand skal du flytte håndtagene op.



C. OPLADER

- Sættet inkluderer en oplader dedikeret til batteriet.
- Batteriets opladningstid er omkring 6-8 timer.
- Sæt opladeren i opladningsporten placeret i kontrolmodulet (fjern lommelygtemodulet før opladning) eller på batteriet.
- Tilslut opladeren til strømforsyningen.

- Tjek forbindelsen.
- For at undgå risikoen for brand må du ikke ændre eller afbryde ladekredsløbet, mens batteriet oplades.

D. BRUGSANVISNING

- Vælg den ønskede køretilstand.

Note! Skift ikke køretilstand, mens du kører i højden.

- Tryk på tænd/sluk-knappen for at kontrollere, at bremserne fungerer korrekt. Bremserne fungerer korrekt (elektrisk tilstand), hvis du ikke kan skubbe kørestolen. Ellers kontakt sælgeren.
- Vip fodstøtten og sæt dig komfortabelt på sædet. Sænk fodstøtten tilbage til vandret position.

Note! Brug ikke fodstøtten som støtte, når du sætter dig ned eller rejser dig fra kørestolen. Dette kan få kørestolen til at vippe og falde.

- Sæt dig på kørestolen og tænd for kontrolpanelet. LCD-panelet vil lyse op. Joysticket skal være i neutral position.
- Vær forsigtig, når du bruger den første gang. Kontroller hastigheden og retningen omhyggeligt. Den elektromagnetiske bremse udløses først efter at have trykket på joysticket (elektrisk tilstand). For at øge hastigheden skal du skubbe joysticket længere væk fra dets neutrale position. For at sætte farten ned – gør det modsatte.
- Slip joysticket for at standse kørestolen. Et tryk på tænd/sluk-knappen vil også stoppe kørestolen.
- Brug dedikerede knapper på kontrolpanelet til at justere kørestolens hastighed i henhold til brugerens fysiske tilstand og vejforhold.
- Kørestol bør kun bruges på flade overflader. Kørsel på mudrede eller ujævne overflader kan forårsage skade på kontrolsystemet.

6. Tekniske data

Produktkode	SMART-TIM
Samlet højde	88 cm
Samlet bredde	54 cm
Samlet længde	82 cm
Sædehøjde fra jorden	44 cm
Ryglænets højde	46 cm

Sædehyndes dimensioner	41 x 42 cm
Batterivægt	2,30 kg
Maksimal kapacitet	115 kg
Kørestolsvægt	14,70 kg
Hjul	foran: solid, drejelig 6" bagside: solid, 8"

7. Rengøring og vedligeholdelse

- Det anbefales regelmæssigt at efterse konstruktionen og dens elementer (hjul, rammer, kabler, styremodul, bremses osv.).
- Alle brugte eller beskadigede kørestolsdele skal udskiftes (i sådanne tilfælde skal du kontakte sælgeren).

8. Batterivedligeholdelse og rengøring:

- 1) Kontroller regelmæssigt det viste batteriniveau. Hvis niveauet er meget lavt, skal det straks oplades for at undgå et spændingsfald (som kan påvirke batteriets levetid).
- 2) Hvis kørestolen ikke skal bruges i længere tid, skal batteriet oplades mindst en gang om måneden.
- 3) Batteriet har en vis levetid. Udskift dit batteri, hvis det bliver slidt.
- 4) Batteriet skal holdes rent og væk fra børn. Undgå at forårsage stød eller beskadigelse af batteriet.
- 5) Oplad den regelmæssigt for at forlænge dens levetid.
- 6) Brugte batterier skal bruges i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser.

9. Opbevarings- og transportforhold

A. TRANSPORT

- Vær forsigtig under transport. Smid ikke, vend eller læg pres på produktet og dets emballage.
- For kørestolsfoldning, tjek „Samning og justering”.

B. OPBEVARING

Kørestolen skal opbevares på et tørt og godt ventileret sted. Undgå: høj temperatur og dens hurtige ændringer, syrer, baser og ætsende kemikalier.

C. OPBEVARINGSBETINGELSER

Temperatur: -40[°C] ~+55[°C]

Luftfugtighed: ≤80 %

Lufttryk: 86 ~ 106 kPa

10. Fejlfinding

- I tilfælde af en funktionsfejl vil kontrolmodulet indikere det med stemmemeddelelse, lyd og advarsel på skærmen. Antallet af lydadvvarsler kan hjælpe med at identificere problemet.

Problemindikator	Årsag	Mulig løsning
Modulet tænder ikke efter at have trykket på tænd/sluk-knappen	A. Batteri: er ikke tilsluttet strømkabel / er ikke opladet / tænd / sluk-knappen er slukket / er beskadiget. B. Tænd/sluk-knappen er beskadiget / kontrolmodulet er beskadiget.	A. Tjek om batteriet: er opladet / tænd/sluk-knappen er tændt / strømkabel er korrekt monteret / ikke er beskadiget. B. Kontakt sælgeren for at udskifte beskadigede dele.
Efter tænding vises den røde advarsel på skærmen med ringealarm og stemmebesked.  E1	Batteriniveauet er lavt.	Oplad batteriet i mindst 30 minutter, før du tænder det.
Efter tænding vises den røde advarsel på skærmen med ringealarm og stemmemeddelelse: venstre bremsefejl.  E3	Venstre bremse er i manuel tilstand / er beskadiget.	A. Skift venstre bremse til elektrisk tilstand. B. Kontroller, om motorer eller strømledninger er beskadigede. Hvis ja - kontakt sælger. C. Træk venstre bremsetilslutningskabel af og tilslut til højre bremsestik. Gør det samme for højre bremsestik. Hvis problemet stadig opstår, er det forbundet

		til controlleren. Kontakt sælger for mere information.
Efter tænding vises den røde advarsel på skærmen med ringealarm og stemmemeddelelse: højre bremsefejl.  E5	Højre bremse er i manuel tilstand / er beskadiget.	A. Skift højre bremse til elektrisk tilstand. B. Kontroller, om motorer eller strømledninger er beskadigede. Hvis ja - kontakt sælger. C. Træk højre bremsetilslutningskabel af og tilslut til højre bremsestik. Gør det samme for højre bremsestik. Hvis problemet stadig opstår, er det forbundet til controlleren. Kontakt sælger for mere information.
Efter tænding vises den røde advarsel på skærmen med ringealarm og stemmebesked.  EA/E9	Højre/venstre motorkabelforbindelse føltes af eller er beskadiget.	A. Kontroller, om det højre/venstre stikkabel er tabt. B. Hvis fejlen stadig opstår på trods af, at begge kabler er korrekt monteret, skal den højre sides kabelforbindelse ændres til venstre side. Hvis lydmeddelelsen stadig vises 9/10 gange, er dens problem med kontrolpanelet. Tænd for controlleren. Hvis meddelelsen stadig vises, er kilden til problemet i venstre (10 gange – EA)/højre (9 gange – E9) motor. Kontakt sælger for mere information.
Efter tænding vises den røde advarsel på skærmen	Problem med signaloverførsel mellem styremodul og styreboks.	Kontakt sælger for at bytte kontrolmodul og controllerboks.

med ringealarm og stemmebesked.  E6		
Efter tænding vises den røde advarsel på skærmen med ringealarm og stemmebesked.  E8	Kontrolmodul problem	Kontakt sælger for at bytte kontrolmodul (eller både kontrolmodul og kontrolboks i tilfælde af mere alvorlige problemer).

11. Garantioplysninger

- Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er dækket af en garanti, hvis vilkår er beskrevet i garantikortet, der er tilgængeligt på vores hjemmeside. Kontakt venligst den forhandler, hvor du har købt produktet. Vær venligst opmærksom på, at købsbeviset (kvittering eller faktura) skal opbevares af hensyn til garantien. Som en brugervenlig virksomhed leverer vi kun testede produkter - hvad angår materiale, kvalitet og funktionalitet. Hvis du har spørgsmål vedrørende serviceprocedurer, bedes du kontakte os.
- Garantien dækker ikke:
 - sliddele: polstring, dæk, armlæn, batteri
 - skader som følge af: selvreparationer, ændringer i produktkonstruktion, tab, transport, uhensigtsmæssig brug, manglende overholdelse af instruktioner, naturkatastrofer (brand, jordskælv, oversvømmelse).



Xuzhou Heabens Medical Technology Co., Ltd.

No. 2 Industrial Concentration Zone, Liucheng Avenue, Weimiao Town, Peixian County, Xuzhou, Jiangsu, China.



SUNGO Europe B.V.

Fascinato Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan des IJssel, The Neatherlands



Timago International Group

Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland
T.: +48 33 499 50 00
E.: info@timago.com



03/2025 (I)