

BRUGSANVISNING

Skum anti-decubitus madras med vaskbart dampgennemtrængeligt betræk Produktkode: TriMATE Care



Før du bruger produktet, skal du læse denne vejledning. Brugsanvisningen indeholder information, der er nødvendig for sikker og korrekt brug af produktet, hvordan man vedligeholder og rengør det. Brug af produktet, der ikke er i overensstemmelse med reglerne i brugsanvisningen, kan risikere alvorlige komplikationer. Instruksen skal opbevares på et let tilgængeligt sted.

1. Karakteristisk

Madrassen er lavet af polyurethanskum, og dens vaffelformede design giver anti-decubitus egenskaber. Madrassen er udstyret med et vaskbart dampgennemtrængeligt betræk med lynlås. Den indeholder forskellige lag skum (i rækkefølge: VP2830, T2845, T2540), der giver optimal stabilisering, ventilation og trykfordeling.

2. Anvendelse

Anti-decubitus skummadrassen, takket være dens design, giver konstant adgang til frisk luft, som kombineret med den korrekte fordeling af tryk og tilpasning af madrassen til kroppen, forhindrer dannelsen af tryksår og hjælper også med behandlingen af dem, der allerede er dannet.

3. Kontraindikationer til brug:

- Brug ikke produktet, der ikke passer til sengerammen.
- Brug ikke produktet andet end det tilsigtede.
- Brug ikke produktet i nærheden af åben ild eller på en varm overflade. Det kan skade brugeren alvorligt og føre til alvorlig helbredsskade.

4. Noter



Producenten påtager sig ikke ansvar for ukorrekt vedligeholdelse af produktet, manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter og misbrug.

- Huden på tilslutningsstedet skal være ren.
- Det er nødvendigt regelmæssigt at kontrollere tilstanden af patientens hud.
- Brugernes stilling bør ændres regelmæssigt for at undgå dannelse af sår/sår.

- Brug ikke skarpe genstande og udstyr, der kan beskadige dækslet.
- Madrassen skal tilpasses sengens størrelse.
- Oprethold høj hygiejne af madrasbetrækket: rengør og/eller vask.

Hvis produktet ikke længere er egnet til brug, skal det bortskaffes. Før bortskaffelse bør produktet rengøres for at eliminere risikoen for kontaminering.

Hvis der er uønskede symptomer som følge af brugen af udstyret, skal det rapporteres til producenten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren eller patienten bor.

5. Udpakning og montering

- Når du modtager forsendelsen med madrassen, skal du åbne den forsigtigt for ikke at beskadige madrassen.
- Læg madrassen på en flad overflade og vent på, at alle deformationer forårsaget under transporten vender tilbage til sin oprindelige form.
- Madrassen skal monteres på patientens seng for fuldt ud at udfylde dens funktioner.

6. Tekniske data

PARAMETRE	TriMATe pleje
Længde	200 cm
Bredde	90 cm
Højde	15 cm
Kapacitet	160 kg

7. Rengøring og vedligeholdelse

- Vask ikke skummadrassen.
- Vask betrækket efter fjernelse af skumindsatsen i et mildt rengøringsmiddel ved temperaturer op til 90°C.
- Betrækket kan steriliseres ved temperaturer op til 120°C.
- Betrækket kan desinficeres med op til 60 % alkoholopløsning.
- Brug ikke blegemiddel eller kemikalier.
- Rengør ikke kemisk.
- Brug ikke kemikalier, der indeholder klor.
- Det anbefales at tørre i udfoldet tilstand.

- Tillad ikke kraftig tilsmudsning.

8. Opbevarings- og transportforhold.

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.

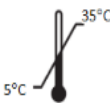
9. Garantioplysninger

Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er dækket af en garanti, hvis vilkår er beskrevet i garantikortet, der er tilgængeligt på vores hjemmeside. Kontakt venligst den forhandler, hvor du har købt produktet. Vær venligst opmærksom på, at købsbeviset (kvittering eller faktura) skal opbevares af hensyn til garantien.

KLAGER ER IKKE UNDERLAGT:

- Mekanisk skade (afskrabninger, skrammer).
- Skader som følge af naturlig brug.
- Fejl som følge af forkert dimensionering af madrassen til sengen.
- Fejl som følge af manglende overholdelse af brugsbetingelserne eller metoden til rengøring og vedligeholdelse.
- Misfarvning af betrækket.
- Komfort ved brug.

10. Etiketter

	Referencenummer		Fabrikant
	LOT nummer		Unikke enhedsidentifikationer
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Note		Læs venligst instruktionen
	Brug efter dato		Tilladt opbevaringstemperatur
	Opbevares på et tørt sted		Beskyt mod sollys

	Emballagen er genanvendelig		Emballagen skal smides i skraldespanden
	Producenten kontrollerede overholdelse af væsentlige krav til medicinsk udstyr.		



MED-MAT
Przemysław Cesarz
 ul. Kochcicka 16/1
 42-700 Lubliniec, Poland



Timago International Group
 Ossowski Sp. k.
 ul. Karpacka 24/12
 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
 F.: +48 33 499 50 11
 E.: info@timago.com



03/2025 (I)