

BRUKSANVISNING


Trehjulig aluminiumrollator

Produktkod: RAPID

Timago

1. Utförande

En hopfällbar trehjulig rollator, tillverkad i en lätt aluminiumram, belagd med metallisk lack. Utrustad med höjdbar körhandtag med anatomiska grepp och en broms med parkeringsspärr. Rollatorn har hjul med en smal profil och en diameter på 8" samt en shoppingväska med dragkedja.

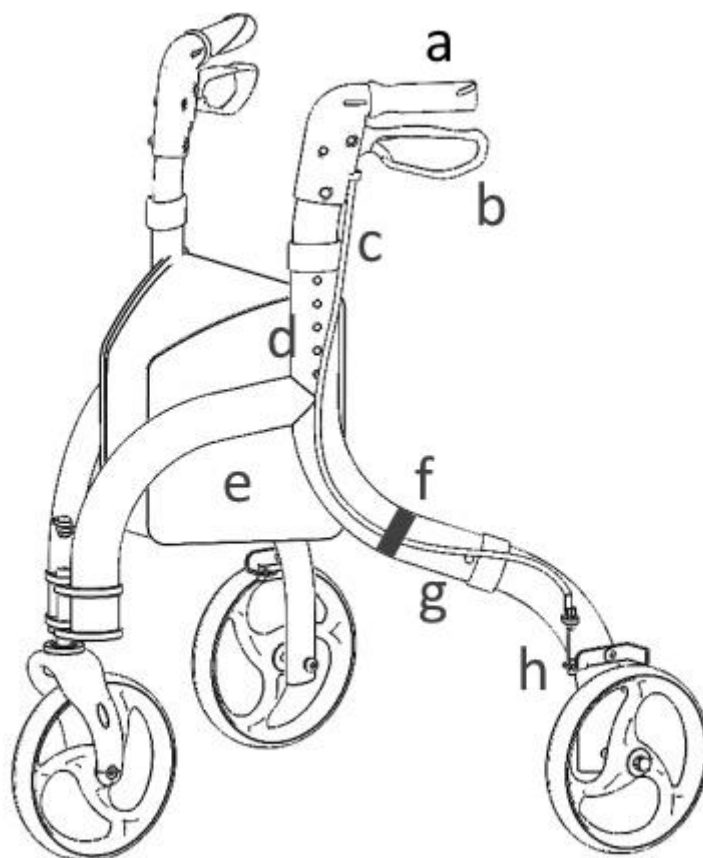

Rollatorn består av:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. handtag | e. shoppingväska |
| b. broms | f. kardborreband |
| c. bromskabel | g. låsstift för blockering av benet |
| d. låsstift för blockering av handtaget | h. bromsjustering |

2. Användning

En trehjulig rollator är ett hjälpmedel avsett för personer med nedsatt fysisk funktionsförmåga som behöver ett stabilt grepp och gångstöd. Den rekommenderas också som hjälpmedel för äldre personer med dålig balans, vilket förbättrar deras gångkomfort och skyddar dem mot fall. Tack vare användningen av rollatorn kan personer med gångsvårigheter eller problem med att resa sig till stående ställning upprätthålla en aktiv vardag. Rollatorn säkerställer hög stabilitet, bättre stöd och säkerhet under gången.

3. Montering, uppfällning, hopfällning och justering av rollatorn

Monteringsdelar:

- A. rollatorram
- B. höger handtag
- C. höger ben med hjul
- D. vänster ben med hjul


- E. vänster handtag
- F. shoppingväska
- G. kardborreband (2 st.)



Montering

- Fäll upp rollatorramen genom att skjuta ut båda delarna av tvärröret tills det är låst på plats (Figur 1).
- Sätt in vänster ben i vänster hål längst bak på ramen genom att trycka på låsstiftet för blockering av ben (hjul med broms vänds utåt). Lås stiftet i hålet i rollatorramen.

- En bromskabel förbinder vänster ben med vänster handtag. Sätt in vänster handtag i vänster hål i ramen genom att trycka på låsstiftet för blockering av handtag. Lås stiftet i hålet i rollatorramen genom att ställa in önskad höjd på handtaget.
- För bromskabeln utåt och säkra den med ett kardborreband (Figur 2).
- Montera höger ben och höger körhandtag på motsvarande sätt.

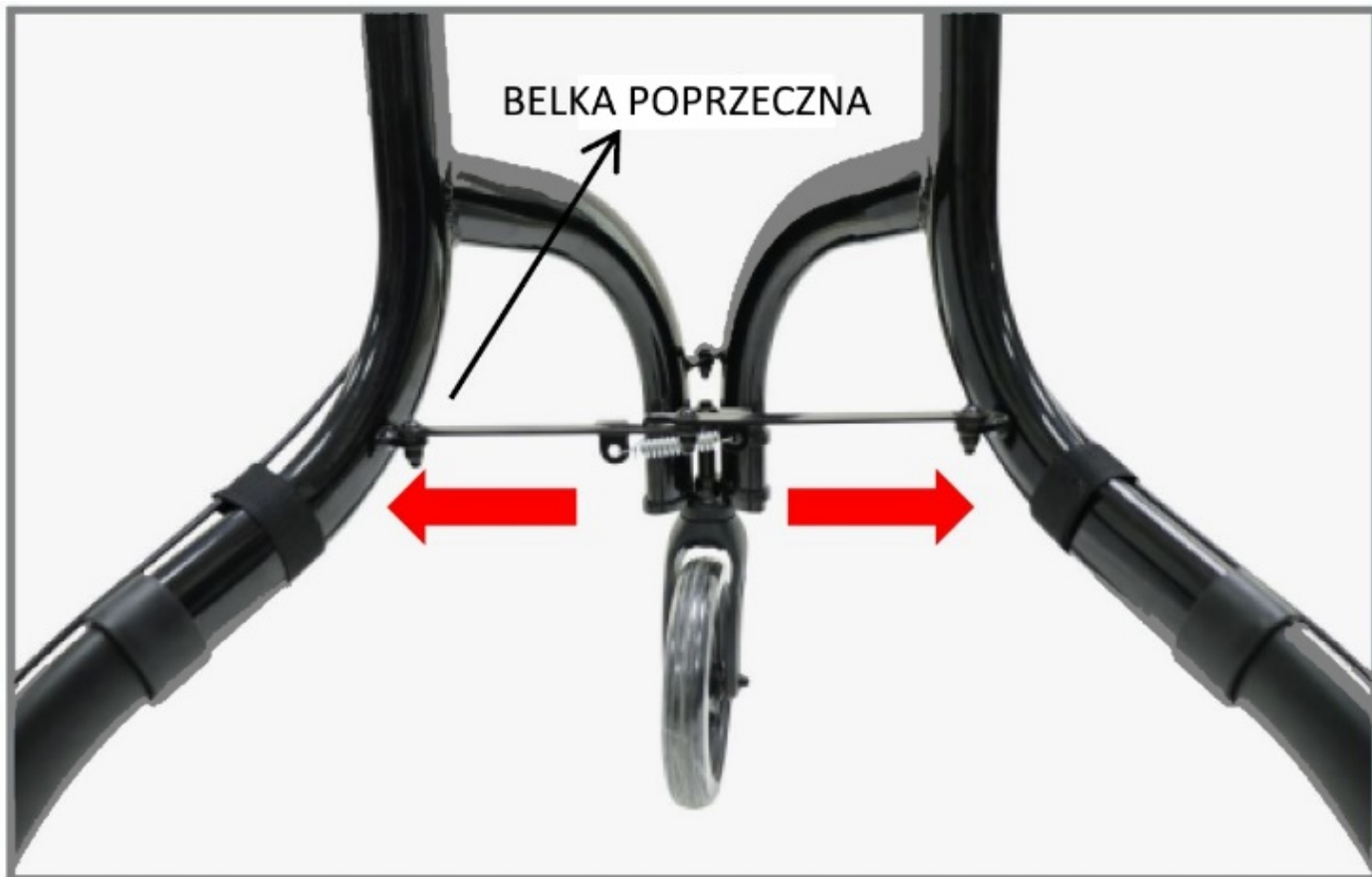

Figur 1

Textförklaring

Belka poprzeczna – tvärrör

Montering av shoppingväska

- Sätt in det ena av T-fästena, som är placerat på sidan av väskan, i hålet överst på rollatorramen (Figur 3). Fickorna ska vara placerade längst bak på rollatorn, dvs. de ska vara vända mot användaren.
- Upprepa samma procedur på den andra sidan av väskan.



Figur 3

Textförklaring

Funkcja hamowania – bromsfunktion

Blokowanie hamulca postojowego – Aktivering av parkeringsbroms

Odblokowanie hamulca postojowego – Deaktivering av parkeringsbroms

Bromsfunktion

- För att stanna rollatorn ska du flytta bromshandtaget uppåt mot handtaget och sedan hålla det i denna position en stund (Figur 4).
- Vid parkering ska du låsa bromsen med en parkeringsspärr genom att dra bromshandtaget nedåt.
- För att frigöra bromsen ska du dra bromshandtaget uppåt.

Höjdjustering av handtagen

Aktivera båda bromsarna med parkeringsspärren för att stanna rollatorn. Tryck på stiftet för blockering av handtaget och håll det nedsänkt. Justera sedan handtagets höjd.

Frigör låsstiftet för att låsa handtaget i den inställda höjden. Dra handtaget upp och ner ett par gånger för att kontrollera att det är korrekt låst i den inställda höjden.

Justera höjden på det andra handtaget på motsvarande sätt.

OBS! Handtagen måste vara inställda i samma höjd.

Hopfällning och uppfällning av rollatorn

- För att fälla ihop en monterad rollator ska du demontera väskan och sedan trycka på och fälla ihop båda delarna av tvärröret (Figur 5). Håll därefter ner båda handtagen och tryck dem inåt.
- För att fälla upp en monterad rollator ska du hålla ner båda handtagen och dra dem utåt. Fäll sedan ut båda delarna av tvärröret tills det är låst på plats.



Figur 5

Textförklaring

Nakrętka regulacyjna 8 mm – justeringsmutter 8 mm

Nakrętka zabezpieczająca 10 mm – säkerhetsmutter 10 mm

Justering av nedre bromsar

Lossa säkerhetsmuttern med en ringnyckel 10 mm (Figur 6). Justera sedan bromsarnas spänning med en ringnyckel 8 mm (det ska alltid finnas ett litet mellanrum mellan bromsmekanismen och hjulet efter att bromshandtaget har frigjorts). Dra åt säkerhetsmuttern 10 mm och kontrollera, medan du drar åt muttern, att justeringsmuttern inte har flyttat sig.

4. Teknisk specifikation

Total bredd	68,5 cm
Total längd	67 cm
Total höjd	84-94 cm
Hjuldiameter	8"
Vikt	4,4 kg
Max. belastning	136 kg
Max. belastning av korgen	5 kg
Ramfärg	svart

5. Anmärkningar och anvisningar

Timago International Group avsäger sig allt ansvar för olämplig användning av rollatorn, underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna och användning av rollatorn i strid med dess syfte.

6. Underhåll

Rollatorramen ska rengöras med en fuktig trasa och därefter torkas av noggrant. Det är inte tillåtet att använda aggressiva polermedel på grund av risken för skador på skyddslagren. Ta kontinuerligt bort alla föroreningar från rollatorns rörliga delar (fästen, klämskruvar, lås).

7. Förvarings- och transportvillkor

Produkten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten och fukt.

8. Garantiinformation

Produkten omfattas av garantin. Garantivillkoren beskrivs i garantikortet som du har fått. Spara inköpsbeviset (kvitto eller faktura) för garantiändamål.

9. Märkning

REF Referensnummer	 Tillverkare
LOT Partinummer	 Tillverkningsdatum
SN Serienummer	MD Medicinteknisk produkt
 OBS	 Läs bruksanvisningen noggrant
CE Tillverkaren har bedömt att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven som ställs på medicintekniska produkter.	

Kontakta våra återförsäljare för att bekanta dig med hela vårt sortiment.

För mer information, se webbplatsen www.timago.com

Tack för att du valde Timago-produkten!

Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka - Spółka komandytowa [AB och KB]

ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polen

Tfn: +48 33 499 50 00

Telefax: +48 33 499 50 11

E-post: info@timago.com

CE MD

10/2023(1)