

SV

Fällbar rullstol

Modell 9.050

Modell 3.940

Bruksanvisning



MEYRA®
Vi gör människor rörliga.

Innehållsförteckning

Inledning	4
Modeller	5
Indikationer	5
Mottagning	5
Specifikation	6
Användning	6
Anpassning	7
Livslängd	7
Översikt	8
Broms	9
Tryckbroms - användare	10
Ansätta bromsen	10
Lossa bromsarna	10
Färdbroms	10
Trumbroms – ledsagare	11
Funktionen är som hos färdbromsen	11
Koppla in trumbromsarna	11
Lossa trumbromsen	11
Benstöd	12
Vadbälte	12
Ta bort vadbältet	12
Anbringa vadbältet	13
Längdinställning av vadbältet	13
Benstöds underdel	13
Fotplattor	13
Benstöds överdel	14
Fälla undan benstöden	14
Svänga in benstöden	15
Ta bort benstöden	15
Hänga upp benstöden	15

Armstöd	16
Svänga upp armstöden	17
Svänga in armstöden	17
Svänga ned armstöden	17
Ta bort armstöden	18
Sticka in armstöden	19
Hjul	20
Drivhjul	20
Stickaxel	20
Drivhjul med luftfyllda däck	20
Punktering vid luftfyllda däck	20
Ryggstöd	21
Ryggbandet	21
Anpassa ryggbandet	21
Stödrullar	22
Instickbara stödrullar	22
Borttagning/instickning av stödrullar	22
Bälte	23
Persontransport i motorfordon	24
Säkra rullstolen	24
Underhåll	24
Underhållsarbeten	24
Underhållsschema	25
Tekniska data	28
Betydelsen av dekalerna på rullstolen	33
Vad symbolerna på typskylten betyder	34
Inspektionsintyg	35
Anteckningar	36
Garanti	38
Garantiavsnitt	39
Överlämnande av inspektionsintyg	39

INLEDNING

Vi tackar för ditt förtroende och för att du har valt en rullstol från den här serien.

Tack vare de olika utrustningsalternativen och tillbehören kan rullstolen anpassas efter just din sjukdomsbild.

En rullstol är i likhet med alla andra fordon också ett tekniskt hjälpmedel. Den kräver förklaring, regelbunden skötsel och för även med sig risker om den inte används ändamålsenligt. Därför måste man lära sig att hantera den. Med hjälp av den här bruksanvisningen kan du bekanta dig med hur rullstolen ska hanteras samt hur olyckor undviks.

Information:

 Utrustningsvarianterna på bilderna kan avvika från din modell.

Det kan därför även finnas kapitel med tillval som eventuellt inte gäller för din individuella rullstol.

Observera:

 Läs igenom och beakta de dokument som följer med rullstolen innan den används för första gången:

- den här bruksanvisningen,
- säkerhets- och de allmänna hanteringsanvisningarna för < *mekaniska rullstolar som drivs av muskelkraft* >.

Information:

Barn och ungdomar bör läsa igenom dokumenten som medföljer rullstolen tillsammans med sina föräldrar eller en assistent/ledsagare innan den används första gången.

För personer med synhandikapp finns det PDF-filer av ovan nämnda dokument på vår hemsida via internet < www.meyra.com >.

 Kontakta din hjälpmedelscentral vid behov.

Alternativt kan synskadade användare få dokumentationen uppläst av en hjälpanvändare.

MODELLER

Den här bruksanvisningen gäller för följande modell:

Modell 9.050

Modell 3.940.

INDIKATIONER

Den här mobilitetsprodukten rekommenderas vid följande indikationer:

- Vid oförmåga eller vid kraftigt begränsad förmåga att gå själv inkl. grundbehovet att kunna förflytta sig i den egna bostaden.
- För att kunna lämna bostaden, för att komma ut i friska luften på en kortare tur eller för att kunna uträtta vanliga ärenden i närområdet.

MOTTAGNING

Alla produkter kontrolleras på fabriken och förpackas i specialkartonger.

Information:

Trots detta ber vi dig att, helst i transportörens närvaro, omedelbart kontrollera att det inte har uppstått skador på produkten under transporten.

Information:

Spara rullstolens emballage om det eventuellt skulle bli nödvändigt att transportera rullstolen senare.

SPECIFIKATION

Rullstolen ur standardfamiljen av fällbara rullstolar har utvecklats för ungdomar och vuxna.

Rullstolen är endast avsedd att transportera en person på sitsen och är inte avsedd att användas som kärra, dragvagn eller liknande.

Information:

Rullstolen ur standardfamiljen av fällbara rullstolar lämpar sig företrädesvis för fritt lån och för korttidsbruk.

ANVÄNDNING

Rullstolen kan användas på jämt, stabilt underlag och nyttjas enligt följande:

- inomhus (t.ex. bostad, daglig verksamhet),
- utomhus (t.ex. i parker),
- på resa (t.ex. på buss och tåg).

Rullstolen kan anpassas till individuella kroppsstorlekar.

Före den första användningen ska rullstolen anpassas av hjälpmedelscentralen. Det innebär att rullstolen anpassas efter användarens körfärdighet och fysiska begränsning och den huvudsakliga användningsplatsen.

Observera:

- ! Låt alltid hjälpmedelscentralen utföra anpassnings- eller inställningsarbeten.
- Stick inte in fingrarna i öppna ramrör (t.ex. efter demontering av armstöd, benstöd eller stödrullar). – Skaderisk!

ANPASSNING

Hjälpmedelscentralen överlämnar rullstolen i körklart skick efter att den har anpassats efter dina behov. Alla relevanta säkerhetsföreskrifter har tillämpats.

Information:

Vi rekommenderar att anpassningen av rullstolen kontrolleras regelbundet för att den ska kunna användas på bästa sätt även om användarens sjukdomsbild eller funktionsnedsättning förändras. Speciellt när det gäller barn eller personer som växer rekommenderas att anpassning görs var 6:e månad.

-  Vi rekommenderar regelbundna läkarundersökningar för att säkerställa körning på allmänna vägar.
-  Anpassningar i efterhand får endast utföras av hjälpmedelscentralen!

LIVSLÄNGD

Vi utgår från en förväntad genomsnittlig livslängd på 4 år, under förutsättning att produkten används för det den är avsedd för och att samtliga underhålls- och servicearbeten utförs.


Produktens livslängd är beroende av hur ofta den används, i vilken miljö den används och hur den sköts.

Produktens livslängd kan utökas genom användning av reservdelar. Reservdelar finns i regel att tillgå upp till 5 år efter att man har slutat tillverka produkten.

-  Den angivna livslängden utgör ingen ytterligare garanti.

ÖVERSIKT

Översikten visar de viktigaste komponenterna på standardtyper av fällbara rullstolar.

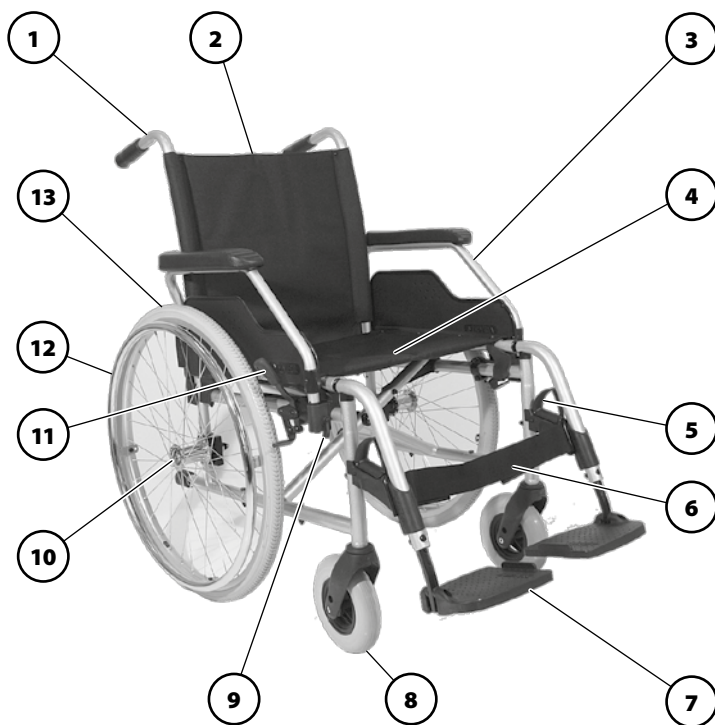

Pos. Benämning

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| (1) Skjuthandtag | (8) Styrhjul |
| (2) Ryggstöd | (9) Låsspak – armstöd |
| (3) Armstöd | (10) Låsknopp – kardanaxel |
| (4) Sitsband/sitskudde | (11) Bromsspak – tryckbroms |
| (5) Låsspak – benstöd | (12) Drivring |
| (6) Vadbälte | (13) Drivhjul |
| (7) Fotplatta | |

BROMS

Genom att dra åt bromsen med hjälp av bromsspaken (1) är rullstolen säkrad mot oönskad ivägrullning (parkeringsbroms).


Beroende på utförande kan rullstolen vara utrustad med tryckbromsar [2] eller med trumbromsar [3].

Information:

Läs också underhållsanvisningen samt säkerhetsanvisningarna och de allmänna hanteringsanvisningarna för < mekaniska rullstolar som drivs med muskelkraft >, kapitlen < Allmänna säkerhets- och allmänna hanteringsanvisningar > och < Bromsar >.

Observera:

- ! Om bromseffekten minskar ska du direkt be din hjälpmedelscentral att reparera den.

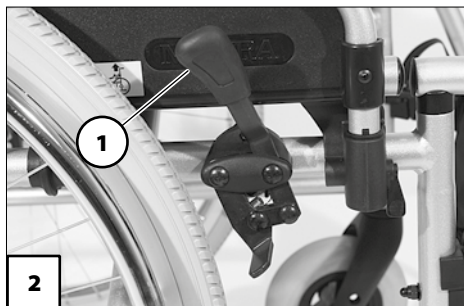


Tryckbroms - användare

Ansätta bromsen

För att säkra rullstolen mot oönskad ivägrullning ska du svänga båda bromsspakarna framåt ända fram till anslaget (1).

Information:

Det ska inte gå att skjuta på rullstolen när man har låst fast bromsen.

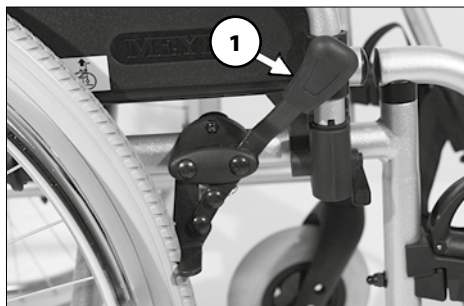

Lossa bromsarna


Sväng båda bromsspakarna bakåt ända till anslaget (2).

Färdbroms

Rullstolen bromsas med hjälp av drivringen.

Information:

Använd ev. lämpliga handskar för att bromsa rullstolen.

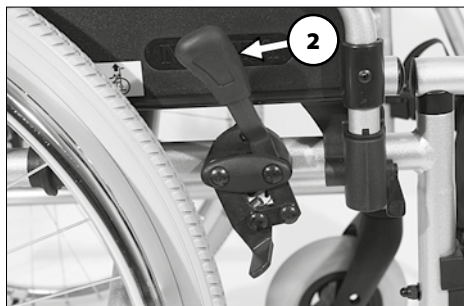


Trumbroms – ledsagare

Ledsagaren manövrerar trumbromsen med hjälp av bromsspaken (1) på det förlängda skjuthandtaget eller på skjutstången.

Observera:

- ! Lyft inte rullstolen över det förlängda skjuthandtaget vid utförande med trumbromsar för ledsagaren! – Det eftergivligt förlängda skjuthandtaget böjs.

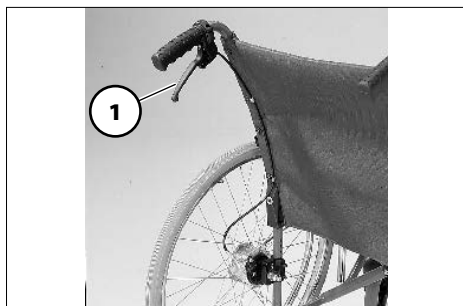

Funktionen är som hos färdbromsen

Dra samtidigt åt båda bromsspakarna något för reglering av rullstolens bromsning.

Koppla in trumbromsarna


För att säkra rullstolen mot oönskad iväg-rullning ska du dra åt båda bromsspakarna lika mycket [2].

- Tryck ytan (A) på spärrhaken nedåt och låt spärrhaken haka i.
- Släpp båda bromsspakarna. – Beroende på aktuell inställning hakar den respektive spärrhaken i den första eller andra spärrpositionen och aktiverar bromsen.

Information:

Det ska inte gå att skjuta på rullstolen när man har låst fast bromsen.

- ! Bromsen ska ställas in på nytt av hjälpmedelscentralen om den tredje positionen måste användas för att aktivera bromsen.

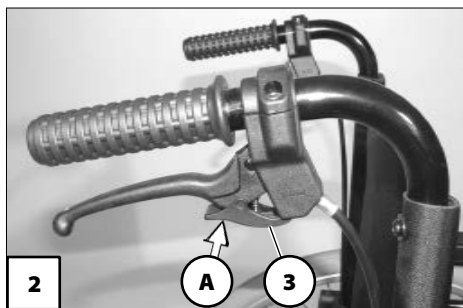

Lossa trumbromsen

Dra åt båda bromsspakarna tills spärrhaken (3) hakar ur automatiskt.

Släpp båda bromsspakarna. – Parkeringsbromsen är lossad och rullstolen är åter körklar

BENSTÖD

Observera:

- ! Säkra rullstolen mot oavsiktlig ivägrullning innan benstöden flyttas.
- Beakta också kapitlet *Broms* på sidan 9.

Vadbälte

Det borttagbara vadbältet (1) hindrar fötterna från att glida ned från fotplattorna.

Observera:

- ! Kör inte utan vadbälte (utom när rullstolen drivs framåt genom korta steg med fötterna)! – Olycksrisk!

Information:

Vadbältet måste tas bort för att benstöden ska kunna svängas undan [2].

Ta bort vadbältet

Vid borttagning dras vadbältet bort från fäst krokarna (3).



Anbringa vadbältet

Vid anbringande skjuts vadbältets öglor över fästkrokarna på båda sidorna [1].

Längdinställning av vadbältet

Vid längdinställning anpassas vadbältet till önskad längd med hjälp av kardborreband på baksidan.



Benstödet underdel

Fäll upp fotplattorna i- och urstigning och när rullstolen drivs framåt genom korta steg med fötterna [2].

☞ Se upp för klämpunkter!

- Flytta båda fötterna från fotplattorna.
- Ta bort vadbältet om sådant finns.
 - ☞ Beakta också kapitlet *Vadbälte* på sidan 12.



☞ Information:

Fäll ned fotplattorna [3] på nytt och sätt på vadbältet innan rullstolen körs.

Fotplattor

Fotplattorna kan fällas upp utåt [2] resp. fällas ned inåt [3].



Benstöds överdel

Benstöds överdel med instucken underdel kallas för benstöd.

Fälla undan benstöden

För att det ska gå lätt att stiga i/ur rullstolen, samt för att den ska kunna köras tätt intill t.ex. skåp, säng, badkar osv. kan benstöden svängas inåt/utåt [1]+[2].

Information:

Ta bort vadbältet och fäll upp fotplattorna innan benstöden svängs undan.

-  Se kapitlet *Vadbälte* på sidan 12 och kapitlet *Benstöds underdel* på sidan 13.

Observera:

-  Undansvängda benstöd är automatiskt olåsta och kan därför lätt falla av. Var försiktig vid vidare hantering av benstöden (t.ex. vid transport).

- För att svänga undan benstöden med respektive låsspak – dra eller tryck benstödet (3) bakåt och sväng undan motsvarande benstöd [1]+[2].



Svänga in benstöden

Information:

Kontrollera låsningen av respektive benstöd efter att benstödet har svängts in hörbart.

-  Läs sedan kapitel *Benstödet*s underdel på sidan 13.

Sväng in benstöden tills låsningen hakar i [1] hörbart.



Ta bort benstöden

För att lättare kunna sätta sig i/resa sig ur rullstolen samt för att minska rullstolens längd (viktigt vid transport) är benstöden avtagbara [2].

Information:

Lossa eller ta bort vadbältet på ena sidan innan benstöden tas bort.

-  Se kapitlet *Vadbälte* på sidan 12.

– Sväng först undan benstödet [3], och ta bort det uppåt [2].

-  Beakta också kapitlet *Fälla undan benstöden* på sidan 14.



Hänga upp benstöden

Information:

Sväng in benstöden efter att de har hängts upp.

-  Beakta också kapitlet *Svänga in benstöden* på sidan 15.

Med benstöden undansvängda åt sidan, tryck fast dem parallella mot främre ramröret och häng upp nedåt [3]. – Låstappen måste glida in i ramröret.



ARMSTÖD

Armstöden [1] kan tas av [2] och fungerar samtidigt som stöd för armarna, klädeskydd och vindskydd.

Observera:

- ! Fatta inte tag mellan ram och armstöd. –
- Risk för klämskador!
- Lyft inte rullstolen i armstöden.
- Rullstolen ska endast användas med armstöden monterade!
- När en ledsagare skjuter på rullstolen ska användaren lägga händerna på armstödet eller i knät, men inte åt sidan mellan kropp och armstöd. – Risk att fingrarna kläms!



Svänga upp armstöden

För att sätta sig i/kliva upp ur rullstolen kan armstöden svängas uppåt [1] och vridas bakom ryggstödet [2].

- För att svänga upp armstöden, dra först armstödet låsspak uppåt (3).
- Sväng sedan armstödet uppåt och bakåt [1].



Svänga in armstöden

- För att svänga in armstöden, sväng först upp armstödet [1] och vrid sedan inåt bakom ryggstödet [2].

📖 Se kapitlet *Svänga upp armstöden* på sidan 17.

Information:


Vid lägre ryggbandshöjder kan armstöden inte vridas bakom ryggstödet.



Svänga ned armstöden

För att svänga ned armstöden, genomför sekvenserna i kapitlen *Svänga in armstöden* på sidan 17 och *Svänga upp armstöden* på sidan 17 i omvänd ordningsföljd.


- 📖 Kontrollera och säkerställ sedan låsningen av armstöden!

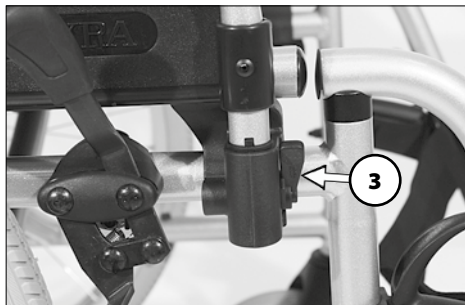

Ta bort armstöden

För att ta bort armstöden [1]:

1. a) Lägg om främre och bakre låsspaken uppåt (2).
1. b) Lägg först om främre låsspaken uppåt (2), sväng sedan armstödet uppåt och inåt.
 Se kapitlet *Svänga in armstöden* på sidan 17.
2. Ta bort armstödet uppåt [1].

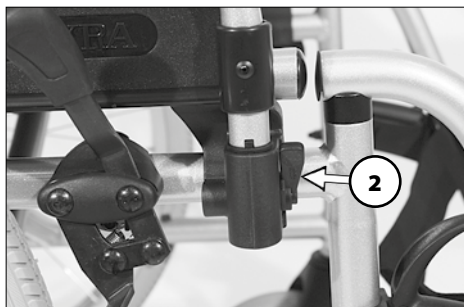

Sticka in armstöden



Information:

Armstödetets rör måste ligga i styrspåret på ryggröret (1).

1. För att sticka in armstödet, stick ned det i motsvarande hållare uppifrån och sväng nedåt.

 Se kapitlet *Svänga ned armstöden* på sidan 17.

2. Lägg om främre och bakre låsspaken nedåt (2)+(3).
3. Kontrollera och säkerställ låsningen av armstöden!

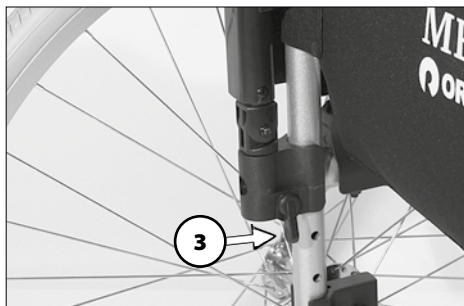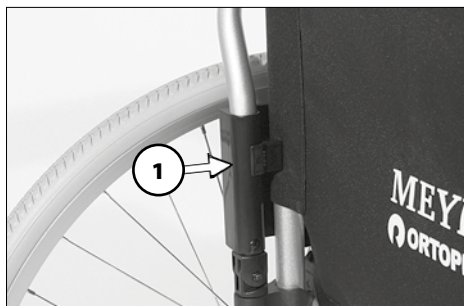

HJUL

Drivhjul

Drivhjulen är lagrade på en stickaxel [1].

- ✎ Om drivhjulet har för stort sidospel eller inte spärras på stickaxeln, ska man omedelbart uppsöka hjälpmedelscentralen för reparation.
- ✎ Ingen får sitta i rullstolen medan ett hjul demonteras eller monteras. Rullstolen ska stå på ett jämnt och fast underlag. Stötta upp underredet tipsäkert och säkra rullstolen mot tippning och ivägrullning före demontering.



Stickaxel

Drivhjulen kan monteras och demonteras utan verktyg.

- Tryck först in stickaxelns spärrknapp (2) i mitten av hjulnavet.
- Demontera eller montera drivhjulet sedan.

Observera:

- ! När drivhjulet är påsatt ska spärrknappen (2) sticka ut några millimeter ur hjulmuttern.

Drivhjul med luftfyllda däck

✎ Information:

Lämpligt lufttryck i rullstolens däck kan hämtas ur *Tekniska data* på sidan 28 eller avläsas på däckens båda sidor.

Punktering vid luftfyllda däck

- ✎ För att avhjälpa en punktering bör man använda skumpatron som finns tillgänglig i fackhandeln. – Därefter ska hjälpmedelscentralen uppsökas omedelbart.

RYGGSTÖD

Ryggbandet


Anpassa ryggbandet

Ryggstödet (1) spänning är inställbar.

- Dra loss baklappen och fäll den framåt (2).
- Öppna kardborrebandet på det spännband (3) som ska ställas in och stäng kardborrebandet på nytt efter inställningen.

Observera:

- ! Kardborrebandets överlappning ska vara minst 10 cm!
- Fäll tillbaka baklappen bakåt och fixera över kardborrebanden (4).

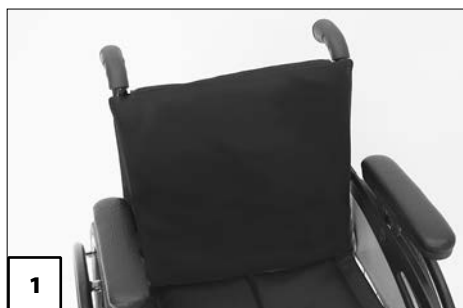

STÖDRULLAR

Instickbara stödrullar

De instickbara stödrullarna kan stickas in bakifrån i det nedre ramröret [1].

Borttagning/instickning av stödrullar

- För borttagning/instickning av en stödrulle ska den tillhörande fjäderknoppen (2) tryckas in.
- 🔊 Efter att den tillhörande fjäderknoppen (2) har stuckits in ska den haka in syn- och hörbart!



BÄLTE

Ändarna på bältet [1] skruvas fast i ryggrören.

Information:

Montering av ett bälte i efterhand ska genomföras av hjälpmedelscentralen!

Observera:

- ! Bältet är inte del av fasthållningssystemet för rullstolen och/eller passageraren vid transport i motorfordon.



PERSONTRANSPORT I MOTORFORDON

Det står angivet på din rullstols typskylt om den är godkänns för persontransport i fordon.



Observera:

- ! Fastmonterade påbyggnader i efterhand på din rullstol med icke originaldelar är inte tillåten för persontransport i transportbil för funktionshindrade.

Säkra rullstolen

Rullstolen får inte säkras enbart i de fyra förankringspunkterna (1) och (2).

- ☞ Förankringspunkterna är märkta med en symbol (3).
- ☞ Tillvägagångssättet för förankring av rullstolen finns beskrivet i dokumentet < Säkerhets- och hanteringsanvisningar för mekaniska rullstolar som drivs av muskelkraft >, kapitlet < Transport i motorfordon eller med fortskaffningsmedel >.

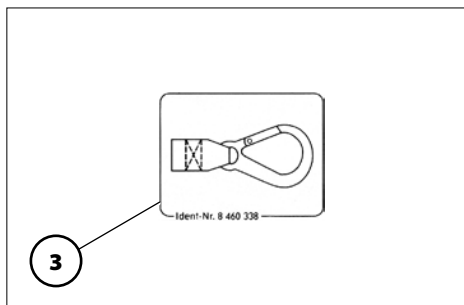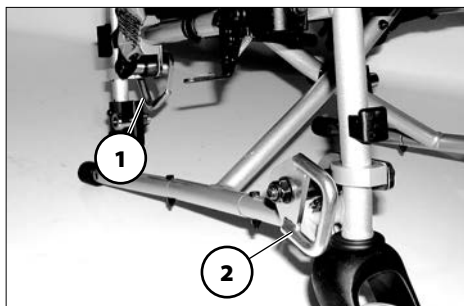

UNDERHÅLL

Bristfälligt eller försummat underhåll av rullstolen medför begränsat produktansvar.

Underhållsarbeten

Följande underhållsschema är tänkt att fungera som riktlinjer för hur underhållsarbetena ska utföras.

- ☞ Den ger ingen information om det faktiska, nödvändiga arbetsomfånget som fastställts på fordonet.

Underhållsschema

NÄR	VAD	ANMÄRKNING
Före användning	Kontrollera att bromssystemet fungerar korrekt. Manövrera bromsspaken ända till anslaget. De bromsade hjulen ska under bruksförhållanden inte längre kunna rotera. Om de gör det, låt hjälpmedelscentralen göra i ordning bromsarna.	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det.
Före användning	Kontrollera tryckbromsen med avseende på slitage För bromsspaken åt sidan	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det. Uppsök hjälpmedelscentralen omgående för reparation om bromsspakens spel ökar. – Olycksrisk!
Före användning	Kontrollera däckens lufttryck	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det. Använd däcktrycksprovare för detta eller, om en sådan inte finns tillhands, tumtrycksmetoden eller liknande (se < <i>Säkerhets- och allmänna hanteringsanvisningar för mekaniska rullstolar som drivs av muskelfkraft</i> >, kapitlet < <i>Däck</i> >).
Före användning	Kontrollera däckprofilen	Utför den visuella kontrollen själv. Om däckprofilen är sliten eller om däcken är skadade ska hjälpmedelscentralen uppsökas.

NÄR	VAD	ANMÄRKNING
Före användning	Kontrollera ryggstörens styrka Kontrollera ramstören med avseende på skador	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det. Uppsök hjälpmedelscentralen omgående för reparation vid deformation eller sprickbildning i områden för svetsfogar. – Olycksrisk!
Före användning Speciellt vid körning i mörker	Kontrollera belysningen Kontrollera att ljus- och blinksystem fungerar oklanderligt.	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det.
Var 8:e vecka (beroende på körsträcka)	Förse komponenterna nedan med några droppar olja – Saxens lagringar. – Låsningens rörliga delar. – Bromsspakens lager.	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det. Före inoljning ska komponenterna befrias från rester av gammal olja. Se till att överflödiga olja inte smutsar ner omgivningen (t.ex. dina kläder).
Var 8:e vecka (beroende på körsträcka)	Kontrollera alla skruvförband med avseende på fastsättning	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det. I synnerhet följande ska kontrolleras: – Fastsättningen av rygg- och sitsprofilerna på sidoramen – Fastsättningen av fotplattorna på sidoramen.

NÄR	VAD	ANMÄRKNING
Var 6:e månad (beroende på hur ofta rullstolen används)	Kontrollera: – Renhet. – Allmänt skick.	Se < Skötsel > i dokumentet < Säkerhets- och allmänna hanteringsanvisningar för mekaniska rullstolar som drivs av muskelkraft >. Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det.
Tillverkarens rekommendation: Var 12:e månad (beroende på hur ofta rullstolen används)	Säkerhetsinspektion – Fordon	Ska utföras av hjälpmedelscentralen.

TEKNISKA DATA

All information under < Tekniska data > avser standardutförandet.

Totallängden är beroende av drivhjulens position och storlek.

Om inget annat anges är måtten fastställda med drivhjul med $\varnothing$ 610 mm (24").

Bredderna är fastställda med ett drivringsavstånd av 15 mm.

Måttolerans $\pm 1\text{cm}$, $\pm 2^\circ$.

Förkortning av rullstolsmått:

SH = Sitthöjd

SB = Sitsbredd

SD = Sittdjupet

RH = Rygghöjd

Beräkning av max. användarvikt:

Observera:

- ! Den tillåtna totalvikten utgörs av rullstolens tomvikt och användarens (personens) maximala vikt.
- Extra vikt orsakad av påbyggnader i efterhand eller bagage minskar den maximala användarvikten.

Exempel:

En förare vill ta med 5 kg bagage. Då minskar den maximala användarvikten med 5 kg.

Lufttryck i däcken vid luftfyllda däck

Maximalt lufttryck i däcken finns angivet på båda sidorna av däcken.

Lufttryck i däcken – drivhjul

Standard:

3,0–4,0 bar = 44–58 psi

Ultralätt gång:

6 bar = 87 psi

Högtryck:

8 bar = 116 psi

Modell: **9.050**

Typskylt: På saxröret

Livslängd: 4 år

Mått

Totallängd med benstöd (min. / max.): 1 020 / 1 080 mm

Längd (utan benstöd (min. / max.): 770 / 830 mm

Totalbredd (min. / max.): 560 / 660 mm

Totalhöjd: 960 mm

Ryggbandshöjd: 42 cm

Sitsbredd: 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 51 cm

Sittdjupet: 43 cm

Sitthöjd, utan sitsdyna (sittytans höjd vid framkanten): 47 / 49 / 51 cm

Armstödshöjd från sittytan: 23 cm

Ryggstöd till armstödet framkant: 28 cm

Sitsdynans tjocklek: 3 / 6 cm

Ryggstödslutning: 90°

Sitsvinkel: 4°

Benstödsinkel: 111°

Fotstöd till sits, utan sitskudde (underbenslängd):

med benstöd Code 93 / 805 (min. / max.): 38 / 50 cm

Hjul

Styrhjul:

ø 180 x 40 mm, PUS: Punkteringsfria

Drivhjul:

ø 610 mm (24 x 1 3/8") PU-däck: Punkteringsfria

Drivring-ø: 53,5 cm

Axel:

Horisontalposition (min. / max.): -30 / 30 mm

Transportmått

Viklängd (utan benstöd, drivhjul (min. / max.):..... 1 020 / 1 080 mm

Viklängd (utan benstöd, drivhjul):..... 750 mm

(Stödrullarna är borttagna eller insvängda under sitsen)

Vikbredd: 280 mm

Vikhöjd: min. 960 mm

Tillåten stigning/nedförsbacke

Max. hinderhöjd (beroende på inställd fotstödshöjd):..... 0 till 100 mm

Minsta vändradie: 1250 mm

Tillåten stigning: 4,5° (8 %)

Tillåten lutning: 4,5° (8 %)

Tillåten tvärlutning: 4,5° (8 %)

Statisk tippsäkerhet i alla riktningar: 6° (10 %)

Klimattekniska data:

Omgivningstemperatur: -25 °C till +50 °C

Förvaringstemperatur: -40 °C till +65 °C

Vikt

Tillåten totalvikt: max. 149,6 kg

Max. brukarvikt (inkl. nyttolast): 130 kg

Tillåten last: 10 kg

Tomvikt: min. 19,6 kg

Tyngsta enstaka komponent: 11 kg

Drivhjul: 2,5 kg

Höjdställbara benstöd: 2,1 kg

Transportvikt: min. 9 kg

(utan benstöd, sidodelar, kuddar, drivhjul)

Modell: **3.940**

Typskylt: På saxröret
Livslängd: 4 år

Mått

Totallängd med benstöd (min. / max.): 1 020 / 1 080 mm

Längd (utan benstöd (min. / max.): 770 / 830 mm

Totalbredd (min. / max.): 560 / 660 mm

Totalhöjd: 960 mm

Ryggbandshöjd: 40 / 42 / 44 cm

Sitsbredd: 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 51 cm

Sittdjupet: 40 / 43 cm

Sitthöjd, utan sitsdyna
(Sittytans höjd vid framkanten): 43 / 45 / 47 / 49 / 51 cm

Armstödshöjd från sittytan: 23 cm

Ryggstöd till armstödet framkant: 28 cm

Sitsdynans tjocklek: 3 / 6 cm

Ryggstödslutning: 90°

Sitsvinkel: 4°

Benstödsinkel: 111°

Fotstöd till sits, utan sitskudde (underbenslängd):
med benstöd Code 93 / 805 (min. / max.): 38 / 50 cm

Hjul

Styrhjul:

ø 180 x 40 mm, PUS: Punkteringsfria

ø 142 x 37 mm: mjukt massivgummi

Drivhjul:

ø 559 mm (22 x 1 3/8") PU-däck: Punkteringsfria

ø 610 mm (24 x 1 3/8") PU-däck: Punkteringsfria

Drivring-ø: 48,5 / 53,5 cm

Axel:

Horisontalposition (min. / max.): -30 / 30 mm

Transportmått

Viklängd (utan benstöd, drivhjul (min. / max.):..... 1 020 / 1 080 mm

Viklängd (utan benstöd, drivhjul):..... 750 mm

(Stödrullarna är borttagna eller insvängda under sitsen)

Vikbredd: 280 mm

Vikhöjd: min. 960 mm

Tillåten stigning/nedförsbacke

Max. hinderhöjd (beroende på inställd fotstödshöjd):..... 0 till 100 mm

Minsta vändradie: 1250 mm

Tillåten stigning: 4,5° (8 %)

Tillåten lutning: 4,5° (8 %)

Tillåten tvärlutning: 4,5° (8 %)

Statisk tippsäkerhet i alla riktningar: 6° (10 %)

Klimattekniska data:

Omgivningstemperatur: -25 °C till +50 °C

Förvaringstemperatur: -40 °C till +65 °C

Vikt

Tillåten totalvikt: max. 147,5 kg

Max. brukarvikt (inkl. nyttolast): 130 kg

Tillåten last: 10 kg

Tomvikt: min. 17,5 kg

Tyngsta enstaka komponent: 11 kg


Drivhjul: 2,5 kg

Höjdställbara benstöd: 2,1 kg

Transportvikt: min. 9 kg


(utan benstöd, sidodelar, kuddar, drivhjul)

Betydelsen av dekalerna på rullstolen

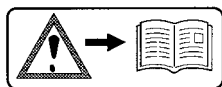

Observera!

Läs igenom bruksanvisningen och de bifogade dokumenten.

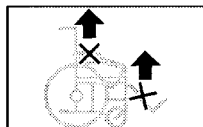

Lyft inte rullstolen i armstöden eller benstöden.
Det är inte lämpligt att lyfta i borttagbara delar.

Achtung

Bremse nachstellen.

Observera!

Efterjustera bromsen.

Achtung

Erhöhte Kippgefahr auf Steigung / Gefälle
besonders in Verbindung mit kurzem Rad-
stand.

Observera!

Förhöjd tippningsrisk i uppförsbackar/nedförsbackar i kombi-
nation med kort hjulavstånd.

Vad symbolerna på typskylten betyder



Tillverkare



Beställningsnummer



Serienummer




Tillverkningsdatum (år – vecka)



Tillåten brukarvikt



Tillåten totalvikt

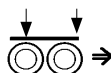

Tillåten axellast



Tillåten stigning



Tillåten lutning

max. ... km/h Tillåten högsta hastighet



Produkten är godkänd som säte i motorfordon



Produkten är **inte** godkänd som säte i motorfordon.

INSPEKTIONSINTYG

Fordonsuppgifter:

Modell:

Följesedelsnr:

Serienr (SN):

Rekommenderad säkerhetsinspektion 1:a året (minst var 12:e månad)

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Namnteckning: _____

Plats, datum: _____

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum: _____

Rekommenderad säkerhetsinspektion 2:a året (minst var 12:e månad)

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Namnteckning: _____

Plats, datum: _____

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum: _____

Rekommenderad säkerhetsinspektion 3:e året (minst var 12:e månad)

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Namnteckning: _____

Plats, datum: _____

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum: _____

Rekommenderad säkerhetsinspektion 4:e året (minst var 12:e månad)

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Namnteckning: _____

Plats, datum: _____

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum: _____

Rekommenderad säkerhetsinspektion 5:e året (minst var 12:e månad)

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Namnteckning: _____

Plats, datum: _____

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum: _____

GARANTI

Vi lämnar en lagstadgad garanti för den här produkten inom ramen för våra allmänna affärsvillkor samt en garanti motsvarande vår redovisade kvalitetsservice. För garantianspråk vänder du dig till din hjälpmedelscentral med GARANTIAVSNITTET nedan och de nödvändiga uppgifterna om modellbeteckning, leveranssedelns nummer, med leveransdatum och serienummer (SN).

Serienumret (SN) hittar du på typskylten.

En förutsättning för att garantianspråk ska godkännas är att produkten har använts på avsett sätt, att originalreservdelar från hjälpmedelscentralen har använts samt att underhåll och inspektioner har genomförts regelbundet.

Garantin omfattar inte ytliga skador, däck, skador orsakade av lösa skruvar eller muttrar, samt utslitna fästhåll orsakade av upprepade monteringsarbeten.

Dessutom gäller garantin inte heller skador på drivsystem och elektronik som kan härledas till felaktig rengöring med ångstrålagregat eller om komponenter avsiktligt eller oavsiktligt har utsatts för vatten.

För störningar från strålningskällor som mobiltelefoner med hög sändningseffekt, HiFi-system och annan, starkt störande strålning som inte överensstämmer med normspecifikationen kan inga garantianspråk göras gällande.

Observera:

- ! Underlåtenhet att beakta bruksanvisningen och utföra underhållsarbeten och i synnerhet tekniska ändringar och utökningar (påbyggnader) utan vårt godkännande leder till att både garantianspråk och allmänt produktansvar upphör att gälla.

Information:

Den här bruksanvisningen är en del av produkten och ska lämnas till användaren samt överlämnas till den nye ägaren vid ägarbyte.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar i vidareutvecklingssyfte.



Denna produkt överensstämmer med EG-direktivet 93/42/EEG om medicintekniska produkter.

Garantiavsnitt

Var god fyll i uppgifterna! Kopiera vid behov och sänd kopian till din hjälpmedelscentral.

Garanti

Modellbeteckning:

Följesedelsnr:

SN (se typskylt):

Leveransdatum:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Överlämnande av inspektionsintyg

Fordonsuppgifter:

Serienr (SN):

Modell:

Följesedelsnr:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Namnteckning: _____

Plats, datum: _____

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum: _____

MEYRA GmbH



Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf



Tel +49 5733 922 - 311
Fax +49 5733 922 - 9311



info@meyra.de

www.meyra.de
